



Pulver / Powder / Poudre / Polvo / Polvere

Trivest 6 kg (40 x 150 g)

REF

106-731-00

Anmischflüssigkeit / Mixing liquid / Liquide de mélange /
Líquido de mezcla / Liquido di miscelazione

Trivest 1 l

106-706-00

Power Liquid 1 l


105-502-00



20 °C
68 °F



22 °C
72 °F

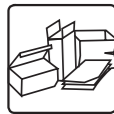

Werkstoffkennwerte / Material parameters / Caractéristiques / Valores nominales / Espansione termica lineare



DIN EN ISO 15912

Type 1, class 1

Erstarrungsbeginn / Initial setting time / Début de la solidification /
Inizio del fraguado / Inizio indurimento 7 min 30 s *

Druckfestigkeit / Compressive strength / Résistance à la compression /
Resistencia a la presión / Resistenza alla pressione 3 – 4 MPa *

Fließfähigkeit / Fluidity / Ecoulement libre / Fluidità / Fluidità 185 – 195 mm *

Thermische Expansion / Thermal expansion / Expansion thermique /
Expansión térmica / Espansione termica 1,21 % *

* Liquid 100 %

Für Ihre Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte steht Ihnen unsere zahntechnische
Anwendungsberatung gerne zur Verfügung.

Hotline Tel.-Nr. Zahntechnik

+497231/803-410

Gebührenfreie Fax-Nr.

0 800 / 4 14 24 34

Telefonische Auftragsannahme

+497231/803-210

Mehr Informationen zu Dentaurem Produkten finden Sie im Internet.

Sie können unsere Produkte auch online bestellen unter:

www.dentaurem.de

Stand der Information:

Date of information:

Mise à jour :

Fecha de la información:

Data dell'informazione:

04/07



Trivest

Phosphatgebundene Einbettmasse

Phosphate bonded investment material

Revêtement à liant phosphate

Revestimiento ligado con fosfato

Rivestimento a legante fosfatico



CoCr / NiCr

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Modo de empleo

Modalità d'uso



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Dentaurem entschieden haben.

Dear Customer

Thank you for having chosen a quality product from Dentaurem.

Chère Cliente, cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la qualité Dentaurem.

Estimadas/os clientes,

mucho le agradecemos que se haya decidido usted por un producto de calidad de la casa Dentaurem.

Egregio Cliente,

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Dentaurem.

Tel +49 72 31 80 34 10

www.dentaurem.de

DE Sicherheitshinweise

Einbettmassen enthalten Quarz. Staub nicht einatmen! Gefahr von Lungenschäden (Silikose/Lungenkrebs). Empfehlungen: Atemschutzmaske vom Typ FFP 2 - EN 149:2001 verwenden. Beutel mit Schere aufschneiden und Staubbildung beim Einfüllen in den Anmischbecher vermeiden. Leeren Beutel vor dem Zusammenknüllen mit Wasser ausspülen.

Staub am Arbeitsplatz nur feucht entfernen.

Um Staub beim Ausbetten zu vermeiden, die nach dem Guss völlig ausgekühlte Muffel in Wasser legen, bis sie durchfeuchtet ist.

Beim Abstrahlen Absaugung mit Feinstaubfilter verwenden.

EN Safety Tips

Investments contain quartz. Avoid inhalation of dust as this may cause lung diseases (silicosis / lung cancer). Wearing of face mask type FFP2-EN 149:2001 is recommended. Open pouch with scissors and avoid dust development when pouring into mixing bowl. Rinse empty pouch with water before disposal.

Remove dust from working area only with a wet cloth.

To avoid dust when devesting place ring into water until it is completely soaked after ring has reached room temperature.

When sandblasting use suction with fine dust filter.

FR Consignes de sécurité

Les revêtements contiennent du quartz. Ne pas inhaler la poussière. Risque de lésions pulmonaires (silicose / cancer du poumon). Recommandations : porter un masque de protection du type FFP2-EN 149:2001. Ouvrir le sachet avec une paire de ciseaux.

Eviter le dégagement de poussière en remplissant le bol de mélange. Rincer le sachet vide à l'eau, avant de le froisser.

Utiliser un chiffon humide, pour éliminer la poussière au poste de travail.

Afin d'éviter un dégagement de poussière lors du démoulage, plonger le cylindre, entièrement refroidi après la coulée, dans l'eau, jusqu'à ce qu'il soit imprégné.

Lors du sablage, utiliser un dispositif d'aspiration avec microfiltre.

ES Normas de seguridad

Los revestimientos contienen polvo de cuarzo. ¡Evite la inhalación del polvo! Riesgo de dañar los pulmones (silicosis / cáncer de pulmón). Recomendaciones: Ponerse mascarilla protectora tipo FFP 2 - EN 149:2001. Cortar la bolsa con tijeras y evitar la formación de polvo al echarlo en la taza de mezcla. Enjuagar con agua las bolsas vacías antes de plegarlas.

Quitar el polvo en el puesto de trabajo sólo con un paño húmedo.

Para evitar la formación de polvo al sacar de mufra, poner en agua el cilindro enfriado por completo después del colado hasta que esté bien mojado.

Al emplear el chorro de arena utilizar aspiración con filtro de polvo fino.

IT Indicazioni di sicurezza

Il rivestimento contiene quarzo. Non inalare la polvere! Rischio di ledere i polmoni (silicosi/cancro ai polmoni). Consiglio: indossare una mascherina di protezione tipo FFP 2 - EN 149:2001. Aprire il sacchetto tagliando il bordo superiore con delle forbici ed evitare di inalare la polvere durante il versamento nel miscelatore. Prima dello smaltimento, sciacquare il sacchetto vuoto sotto acqua corrente.

Asportare la polvere sul posto di lavoro solo con un panno umido.

Per evitare di inalare la polvere durante la smuffolatura, immergere il cilindro già freddo in acqua.

Durante la sabbiatura, utilizzare un filtro fine.

