

*dinamique*<sup>®</sup> *dinamique*<sup>®</sup>



*For a dynamic smile.*  
*Les brackets autoligaturants en céramique et en métal.*





## dinamique<sup>®</sup> *c*

*Esthétique remarquable et confort en bouche pour le patient, manipulation facile et traitement efficace, sans oublier la réduction du temps passé sur le fauteuil – tels sont les atouts qu'offre dinamique<sup>®</sup> c, le bracket autoligaturant en céramique de Dentaurem.*

## dinamique<sup>®</sup> *m*

*dinamique<sup>®</sup> m, le bracket autoligaturant en métal de Dentaurem présente toutes les qualités que se doit d'offrir un système de brackets autoligaturants moderne. Sa faible hauteur en fait un bracket agréable à porter pour le patient. De plus, il est d'usage simple et sûr.*



**Marquage en couleur  
soluble dans l'eau.**

*Assignment facile du bracket à la dent.*



**Systeme à la fois actif et passif.**

*Excellent contrôle dans toutes  
les phases du traitement.*



**Base de bracket conçue pour  
épouser l'anatomie dentaire.**

*Excellent maintien sur la dent.*



**Base disposant de billes d'alumine.**

*Bonne tenue, dépose facile.*





# **dynamique** *Bracket en céramique autoligaturant.*



**Bords arrondis et conception optimale des plots.**

*Excellent confort en bouche, facile à ligaturer.*



**Clip en cobalt-chrome premium recouvert de rhodium.**

*Longévité éprouvée. Ouverture et fermeture faciles.*



**Glissière munie d'un clip de fermeture solide.**

*Sécurité pendant toute la durée du traitement.*



**Couleur du bracket parfaitement adaptée à l'environnement dentaire naturel.**

*Plus d'esthétique.*

**Crochet au design  
en forme de champignon.**

*Bon maintien des éléments élastomères.*



**Marquage en couleur soluble dans l'eau.**

*Assignment facile du bracket à la dent.*



**Système à la fois actif et passif.**

*Excellent contrôle dans toutes les phases  
du traitement.*



**Base de bracket conçue pour  
épouser l'anatomie dentaire.**

*Excellent maintien sur la dent.*



**Contre-dépouilles à plots larges.**

*Bon maintien des éléments élastomères.*



**Base maillée micro-mordancée.**

*Bonne tenue, dépose facile.*



# **dynamique** *Bracket en métal autoligaturant.*



***Faible hauteur et conception optimale des plots.***

*Excellent confort en bouche, facile à ligaturer.*



***Clip en cobalt-chrome premium.***

*Longévité éprouvée. Ouverture et fermeture faciles.*



***Glissière munie  
d'un clip de fermeture solide.***

*Sécurité pendant toute la durée du traitement.*




***Repère central.***

*Pose facile sur la dent.*

# Séquences d'arcs s'accordant parfaitement avec dynamique®.

1

## Phase initiale : Arcs ronds

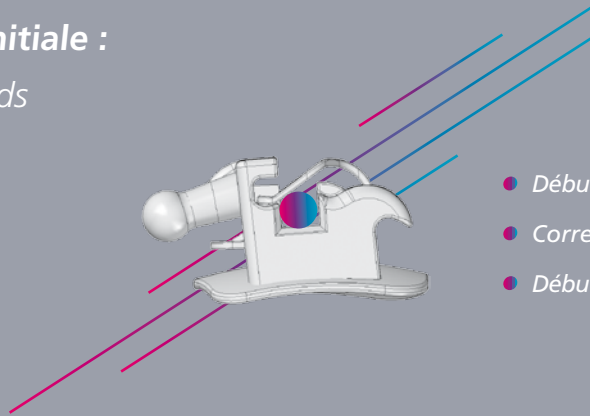

- Début du nivellement et de l'alignement.
- Correction des rotations.
- Début du développement de l'arcade dentaire.

### Tensic®

REF	Diamètre	Quantité	
766-702-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-704-00	ø 0,40 mm/16	10	Maxillaire
766-706-00	ø 0,45 mm/18	10	

REF	Diamètre	Quantité	
766-703-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-705-00	ø 0,40 mm/16	10	Mandibule
766-707-00	ø 0,45 mm/18	10	

### Tensic® White

REF	Diamètre	Quantité	
768-026-00	ø 0,40 mm/16	3	Maxillaire
768-028-00	ø 0,45 mm/18	3	

REF	Diamètre	Quantité	
768-027-00	ø 0,40 mm/16	3	Mandibule
768-029-00	ø 0,45 mm/18	3	

### rematitan® « LITE »

REF	Diamètre	Quantité*	
766-080-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-082-00	ø 0,40 mm/16	10	Maxillaire
766-084-00	ø 0,45 mm/18	10	

REF	Diamètre	Quantité*	
766-081-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-083-00	ø 0,40 mm/16	10	Mandibule
766-085-00	ø 0,45 mm/18	10	

\* disponible également en paquet de 50 pièces

\* disponible également en paquet de 50 pièces

### rematitan® « LITE » White

REF	Diamètre	Quantité	
768-014-00	ø 0,40 mm/16	3	Maxillaire
768-016-00	ø 0,45 mm/18	3	

REF	Diamètre	Quantité	
768-015-00	ø 0,40 mm/16	3	Mandibule
768-017-00	ø 0,45 mm/18	3	

### rematitan® sl


REF	Diamètre	Quantité	
766-272-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-274-00	ø 0,40 mm/16	10	Maxillaire
766-276-00	ø 0,45 mm/18	10	

REF	Diamètre	Quantité	
766-273-00	ø 0,35 mm/14	10	
766-275-00	ø 0,40 mm/16	10	Mandibule
766-277-00	ø 0,45 mm/18	10	



2

**Phase intermédiaire :**  
Arcs carrés / rectangulaires

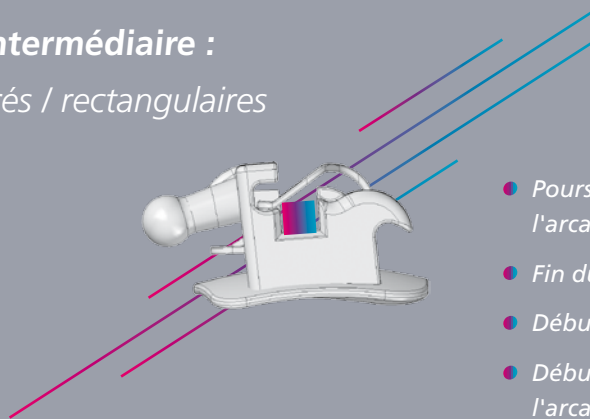

- Poursuite du développement de l'arcade dentaire.
- Fin du nivellement et de l'alignement.
- Début du contrôle du torque.
- Début de la coordination des formes de l'arcade dentaire.

*Tensic®*, rectangulaire

REF		Quantité	
766-710-00	∅ 0,41x0,41/16x16	10	Maxillaire
766-712-00	∅ 0,41x0,56/16x22	10	Maxillaire

REF		Quantité	
766-711-00	∅ 0,41x0,41/16x16	10	Mandibule
766-713-00	∅ 0,41x0,56/16x22	10	Mandibule


*Tensic® White*, rectangulaire

REF		Quantité	
768-030-00	∅ 0,41x0,41/16x16	3	Maxillaire
768-032-00	∅ 0,41x0,56/16x22	3	Maxillaire

REF		Quantité	
768-031-00	∅ 0,41x0,41/16x16	3	Mandibule
768-033-00	∅ 0,41x0,56/16x22	3	Mandibule

3

**Phase finale :**  
Arcs rectangulaires  
(remplit la gorge)

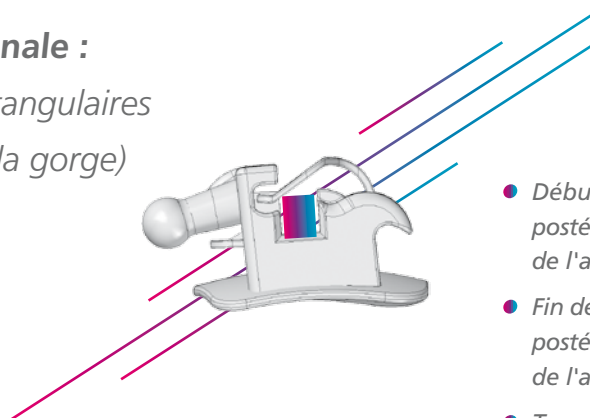

- Début de la consolidation des dents postérieures et de la coordination des formes de l'arcade dentaire.
- Fin de la consolidation des dents postérieures et de la coordination des formes de l'arcade dentaire.
- Transmission complète du torque.

*remanium®*, rectangulaire

REF		Quantité	
767-104-00	∅ 0,46x0,64/18x25	10	Maxillaire
767-105-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	

REF		Quantité	
767-204-00	∅ 0,46x0,64/18x25	10	Mandibule
767-205-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	

*rematitan® SPECIAL*, rectangulaire

REF		Quantité	
766-617-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	Maxillaire

REF		Quantité	
766-618-00	∅ 0,48x0,64/19x25	10	Mandibule

Travail aisé avec dynamique®.



OUVERTURE

FERMETURE

DEPOSE



**Ouverture facile** : tirez doucement dans le sens occlusal avec l'instrument sl. Le clip de fermeture saute.



**Fermeture facile** : poussez doucement le clip de fermeture dans le sens gingival avec le doigt. Bien veiller à ce que le clip de fermeture se ferme complètement.



**Dépose sûre** : à l'aide d'une pince de dépose, saisissez le bracket et serrez délicatement la pince jusqu'à ce que le bracket se détache de la dent. Éliminez les excédents d'adhésif.

## Notre offre marketing pour vous !

- Brochure du patient.
- Modèles de démonstration

## Assortiments et accessoires.

### Assortiments de brackets

REF	Désignation	Quantité
700-550-00	dinamique® c, système Roth 22, Assortiment d'1 cas, crochet sur 3 à 5	1 cas
700-551-00	dinamique® c, système MBT* 22, Assortiment d'1 cas, crochet sur 3 à 5	1 cas
891-410-00	dinamique® m, système Roth 22, Assortiment d'1 cas, crochet sur 3 à 5	1 cas
891-411-00	dinamique® m, système MBT* 22, Assortiment d'1 cas, crochet sur 3 à 5	1 cas

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



### Accessoires

REF	Désignation	Quantité
023-276-00	Instrument sl	1 pièce
004-346-00	Pince à retirer les brackets, droite	1 pièce
004-347-00	Pince à retirer les brackets, coudée	1 pièce
774-216-00	Chaînette en élastomère SUPER Elasto-Force, diamètre intérieur 1,3 mm, longueur 4,5 m	1 rouleau
774-217-00	Chaînette en élastomère SUPER Elasto-Force, avec entretoise, diamètre intérieur 1,3 mm, longueur 4,5 m	1 rouleau
774-210-00	Chaînette en élastomère SUPER Elasto-Force, avec entretoise, diamètre intérieur 1,3 mm, longueur 3,5 m	1 rouleau
774-211-00	Chaînette en élastomère SUPER Elasto-Force, diamètre intérieur 1,3 mm, longueur 3,5 m	1 rouleau

# Groupe Dentaureum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

➔ Vous trouverez toutes les informations sur nos produits et services sur [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)

Mise à jour : 07/17

Sous réserve de modifications



[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)

Dispositif Médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé  
Marquage CE 0483 – DM – Classe IIa. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.  
Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.  
Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance maladie.



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

**D**  
DENTAURUM