

**activeblue**®




Hochleistungs-Reinigungsgerät  
– speziell für KFO-Apparaturen.



**D**  
DENTAURUM

## Schonende Reinigung – schnell und effektiv

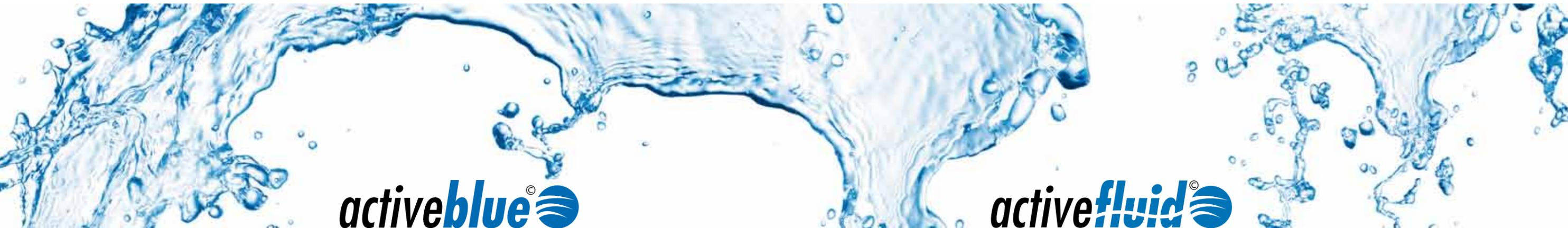

**activeblue**®

**activefluid**®



### Hochleistungs-Reinigungsgerät

REF 098-000-00

Für die schonende Entfernung von Belägen an herausnehmbaren KFO-Apparaturen.

### Lieferumfang:

- 1 x **activeblue**® Hochleistungs-Reinigungsgerät
- 1 x **activefluid**® Reinigungsflüssigkeit, 400 ml
- 1 x Reinigungsbecher weiß
- 1 x Reinigungsnadeln, 75 g
- 1 x Pinzette
- 1 x Haltemagnet
- 1 x Netzkabel -230 V

### Technische Daten:

Netzspannung: 100-240 V bei 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: 90 VA  
Netzsicherung: T 1,6AL / 250 V  
Drehzahlen: 1200 / 1600 / 2000 min<sup>-1</sup>  
Abmaße [B x H x T]: 150 x 240 x 280 mm  
Gerätegewicht: netto 3 kg  
Geräuschpegel: < 70 dB (A)

Das **activeblue**® ist ein kompaktes Hochleistungs-Reinigungsgerät für herausnehmbare kieferorthopädische Apparaturen aller Art. Die Funktion basiert auf der mechanischen Reinigung mittels magnetisierbarer Nadeln im Rotationsverfahren in einer Reinigungsflüssigkeit.

Zusammen mit der speziell für kieferorthopädische Apparaturen entwickelten **activefluid**® Reinigungsflüssigkeit wird eine schnelle und effektive Reinigung der „Zahnspangen“ von hartnäckigen Belägen und Zahnstein erreicht. Insbesondere in Bereichen, wo keine normale mechanische Reinigung (Zahnbürste) möglich ist.

- **exzellente Serviceleistung für Ihre Patienten**
- **perfekt gereinigte herausnehmbare KFO-Platten**
- **einfach, schnell, hygienisch**
- **kleine Größe, passt überall hin**

### Spezialreiniger für activeblue®

Die **activefluid**® Reinigungsflüssigkeit ist ein Spezialreiniger, entwickelt zur Reinigung von KFO-Apparaturen im Hochleistungs-Reinigungsgerät **activeblue**®. Selbst hartnäckige Beläge sowie Plaque und Zahnstein werden problemlos und schonend entfernt. Durch die Ausrichtung der Flüssigkeit, speziell auf KFO-Apparaturen, können Korrosionen und andere Beeinträchtigungen an den sensiblen Dehnschrauben und Drahtelementen ausgeschlossen werden.

Bei Verwendung anderer Reiniger als der **activefluid**® Reinigungsflüssigkeit kann keine Garantie für KFO-Apparaturen übernommen werden!

- **speziell entwickelt für empfindliche KFO-Apparaturen**
- **entfernt selbst hartnäckige Beläge schonend und zuverlässig**
- **für den Patienten unbedenklich**
- **für die Reinigung im activeblue® Hochleistungs-Reinigungsgerät**



### Reinigungsflüssigkeit REF 150-020-00

Die **activefluid**® Reinigungsflüssigkeit steht als Zubehör für das **activeblue**® Gerät zur Verfügung.

Chemische und physikalische Eigenschaft:  
Saure Reinigungsflüssigkeit, pH = 2,0

### Lieferumfang:

1 x 1000 ml **activefluid**® Reinigungsflüssigkeit

# Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
und in über weiteren 130 Ländern der Welt.



- ➔ Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter [www.dentaurum.de](http://www.dentaurum.de)
- ➔ Einfach und schnell bestellen im **Dentaurum Online-Shop** – auch mobil über die kostenlose Katalog-App
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +49 72 31/803-470

Hotline Festsitzende Technik: +49 72 31/803-550 | Hotline Herausnehmbare Technik: +49 72 31/803-555  
Telefonische Auftragsannahme: +49 72 31/803-210 | Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800/4 14 24 34

Stand der Information: 02/14

Änderungen vorbehalten



**D**  
DENTAURUM