



fascinantemente **natural.**

haga un descubrimiento innovador –  
**naturalmente de dentaurem.**



**discovery**<sup>®</sup>  
*pearl*

Más de tres años de desarrollo llevan los nuevos brackets de alta estética discovery<sup>®</sup> de Dentaurem. El bracket de cerámica pura sobrepasa todos los límites conocidos hasta ahora de estética, calidad y rendimiento.

Una vez pegado sobre el diente, gracias a su color y alta translucidez, discovery<sup>®</sup> pearl se adapta por completo al entorno natural de los dientes. Su perfecta geometría y tamaño hacen que el bracket innovador parezca casi invisible en la boca.

discovery<sup>®</sup> pearl cumple las más altas exigencias de una corrección dentaria completamente estética – mediante naturalidad, discreción y eficacia perfeccionadas.

*„LA PERLA ES LA ENCARNACIÓN DE LA BELLEZA NATURAL. SE ORIGINA DENTRO DE UNA CONCHA Y NECESITA TIEMPO HASTA ALCANZAR LA PERFECCIÓN.“*

## **¡Acreditadas ventajas únicas para usted – naturalmente made in Germany!**

Los brackets de cerámica discovery® pearl pertenecen a la comprobada familia de brackets discovery®. Todas las ventajas de esta serie de productos están contenidas y perfeccionadas para usted en discovery® pearl.

### **Acreditada geometría del bracket de la familia discovery®**

proporciona posibilidades de combinaciones entre los brackets discovery® de metal y de cerámica.

### **Perfecta adaptación**

al contorno natural del diente – como si el bracket no existiera.

### **Tamaño óptimo**

pequeño en tamaño, grande en fuerza – para óptimos resultados de tratamiento

### **Guías de color para la colocación**

facilitan el posicionamiento sobre el diente.

### **Base anatómica**

para conseguir una perfecta adaptación sobre el diente.

### **Base estructurada por láser**

con las mejores propiedades para el cementado y descementado.



máxima translucidez para estética perfecta –  
**perfeccionada de forma natural.**

**Calidad y rendimiento máximos –  
naturalmente sin compromisos.**

**„TODO LO PERFECTO  
EN SU CLASE  
TIENE QUE SUPERAR  
SU CLASE.“**

Desde hace 125 años Dentaaurum está apoyando la fabricación de productos que marcan la pauta en calidad y rendimiento. Con nuestros brackets le ofrecemos productos fabricados con la más alta precisión, que le proporcionarán un empleo seguro. Lo cual también es válido para discovery® pearl:


discovery® pearl está hecho completamente de cerámica, sin ningún tipo de metal en el slot. Está construido en 1 sola pieza en las más modernas instalaciones de producción según el procedimiento CIM (Ceramic Injection Molding).

La base del bracket ha sido adaptada de forma óptima por CAD (Computer Aided Design) a la forma del diente, en consecuencia puede posicionarse el bracket sobre el diente con facilidad. Un claro sistema de innovadoras guías auxiliares multicolores de colocación ayuda a adaptar el bracket al diente específico. Además, las guías de colocación le ayudarán a ajustar y colocar el bracket de forma óptima y sencilla.

Con la innovadora base esculpida por láser se consiguen magníficos resultados de adherencia. Junto con el instrumento discovery® pearl para Debonding es sumamente fácil el descementado del bracket y sobre todo es fácil de manipular sin dañar los dientes.




*„LO QUE NOS FASCINA DE LA BELLEZA VISIBLE,  
ES SÓLO LA ETERNAMENTE INVISIBLE.“*

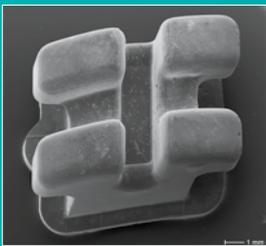

#### **Fotografía REM del bracket.**

El diseño de los brackets discovery® está acreditado desde hace muchos años. Las aletas redondeadas son agradables para el paciente, ofreciendo al mismo tiempo al profesional sitio para colocar ligaduras dobles.

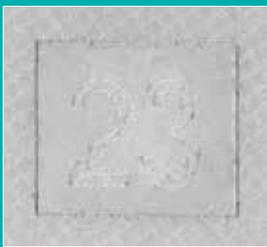

#### **Fotografía REM de la base.**

La estructura láser de la base fue desarrollada en la casa Dentaaurum y empleada con éxito en brackets de metal desde ya hace tiempo. Ésta ofrece adherencia óptima y fácil Debonding.




#### **Situación clínica.**

La situación en boca no puede ser más estética. Los brackets discovery® pearl se adaptan de tal manera al entorno natural de los dientes que se tiene la sensación de que no existiesen: una solución estética perfecta para pacientes exigentes.



#### **Posicionamiento innovador.**

Con las guías de colocación de color es muy fácil ajustar el bracket de forma óptima y posicionarlo sobre el diente. Los diferentes colores de las guías le ayudarán a asignar los brackets a los dientes correctos.

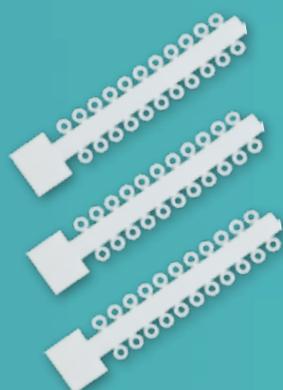

## accesorios discovery® pearl – para conseguir resultados perfectos.

### discovery® pearl Start-Set.

Para los primeros pasos con discovery® pearl le ofrecemos un juego completo inicial. Este "paquete completo" contiene junto a algunos surtidos de brackets todos los implementos, que usted necesita para la terapia estética:

- 5 casos de discovery® pearl
- tipodonto para asesoramiento del paciente
- Dentalastics® en diseño pearl
- modernos arcos translúcidos de policarbonato con fibra de vidrio reforzada
- instrumento discovery® pearl para Debonding

### Dentalastics® pearl y arcos pearl translúcidos.

No hay nada que moleste más la imagen estética de un tratamiento que los arcos de metal y las ligaduras. Por primera vez se ha conseguido crear un arco invisible. Éste está hecho de policarbonato reforzado con fibra de vidrio y en sus propiedades terapéuticas corresponde a un arco de níquel-titanio.

Dentalastics® en diseño pearl redondean el programa de la terapia invisible, adaptándose al entorno del diente de forma óptima, gracias al brillo nácar.

### Instrumento discovery® pearl para Debonding.

Con el innovador instrumento discovery® pearl es sumamente fácil el descementado del bracket. De manera que sin emplear fuerza y sobre todo sin dañar el diente, el bracket se despega del adhesivo en una pieza. El adhesivo queda sobre el diente, puede quitarse entonces. Como alternativa ponemos a su disposición también los alicates Debonding para quitar brackets.

# brackets discovery® – para todo tipo de tratamiento.

Además del nuevo bracket de cerámica discovery® pearl, puede usted elegir entre otros muchos brackets de la familia discovery®. La misma satisface todos los deseos de tratamiento, ofreciendo múltiples posibilidades de combinaciones dentro de la serie.

## discovery®

### La suma de la experiencia.

El bracket discovery® de metal acreditado desde hace años se adapta de forma óptima al diente y ofrece manipulación sencilla – su forma anatómica facilita el posicionamiento sobre el diente.

## discovery® smart

### Pequeño y brillante.

Concentra en sí un pequeño diseño moderno con todas las propiedades brillantes de la familia discovery®.

## discovery® delight

### Sorprendentemente diferente.

#### El sistema lingual.

Con los brackets discovery® delight se alcanza el compromiso de minimizar el número de materiales utilizados.

## discovery® ..pearl

### fascinantemente natural.

discovery® pearl es el innovador bracket de cerámica, de la más alta estética, siendo casi invisible, convenciendo por su calidad perfeccionada.

## discovery® sl    discovery® sl2.0

### Alta tecnología orientada a su éxito.

Los brackets discovery® sl combinan máxima función con mínimo tamaño para conseguir un tratamiento eficaz y estético al mismo tiempo.



➔ Descubra nuestros productos y servicios en [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)

Fecha de la información: 02/16

Reservado el derecho de modificación



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!