


remanium<sup>®</sup>  
star 




Una aleación.  
Tres tecnologías de procesamiento.  
Una calidad premium.

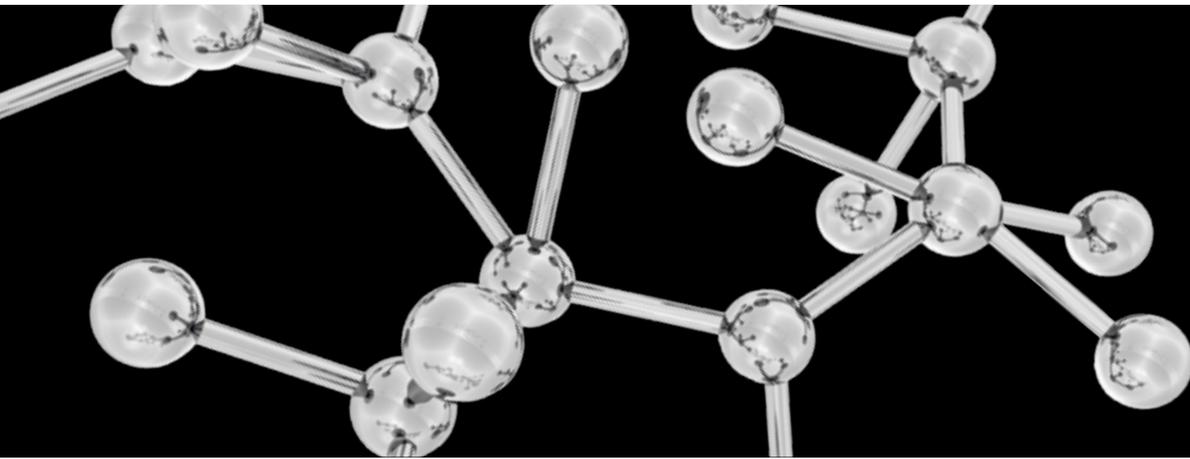

  
DENTAURUM

Una aleación.

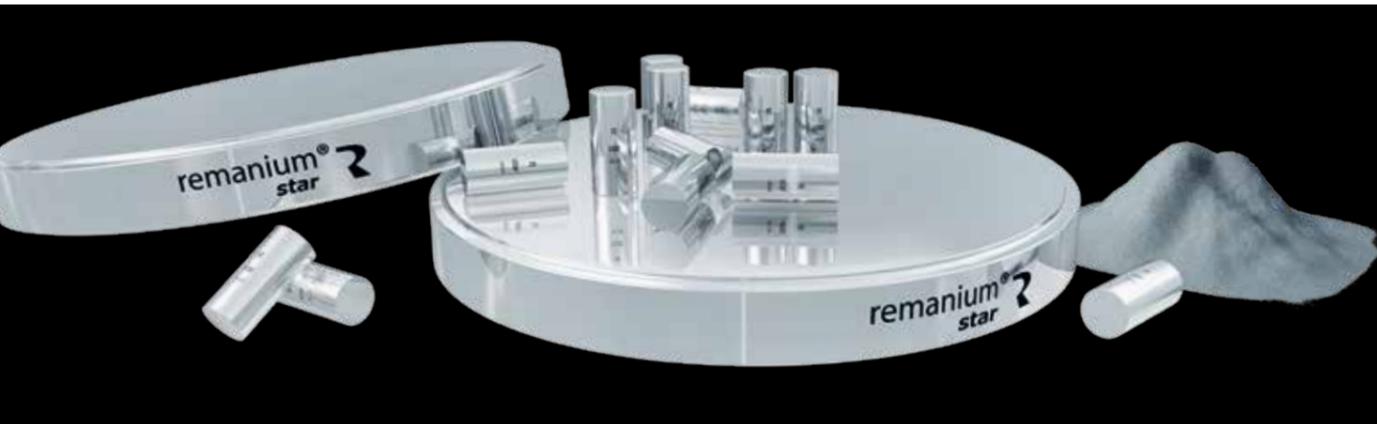

Una calidad premium.



La fórmula de éxito remanium® star.

60,5% Co | 28,0% Cr | 9,0% W | 1,5% Si

Las aleaciones para colado exentas de metales preciosos remanium® de Dentaaurum han sido un sinónimo de calidad en la odontotécnica en las últimas décadas y millones de ellas están en uso. Para garantizar que los usuarios de nuevas tecnologías puedan seguir aplicando estas aleaciones óptimamente acreditadas en clínica, ahora la aleación de CoCr remanium® star está disponible en la misma calidad para tres tecnologías de procesamiento.

remanium®  
star 

¡Calidad y pureza – made in Germany!

- Desarrollo, fabricación y control tienen lugar en Dentaaurum, Ispringen
- Como con todas las aleaciones remanium® se emplean únicamente los materiales más puros
- Todas las aleaciones remanium® se distinguen por su máxima resistencia a la corrosión y su biocompatibilidad científicamente confirmada
- La unión y adherencia con metalocerámica es excelente (p.ej. ceraMotion® Me)
- El tesoro de decenios de experiencia garantizan absoluta seguridad y la más fácil elaboración



## Tres tecnologías de procesamiento.

Garantizamos la calidad premium de remanium® en cada de las tres tecnologías de procesamiento.

### ■ Colar




- excelente comportamiento de fundición y fluidez
- momento exacto para colado es bien visible al fundir con alta frecuencia
- excelentes propiedades de fresado y de pulido por grado de dureza sumamente bajo

### ■ Fresar



- dos calidades premium: estructura de colado pulverizada metalúrgicamente u optimizada
- alta resistencia
- fresado fácil por grado de dureza bajo

### ■ Fundir por láser

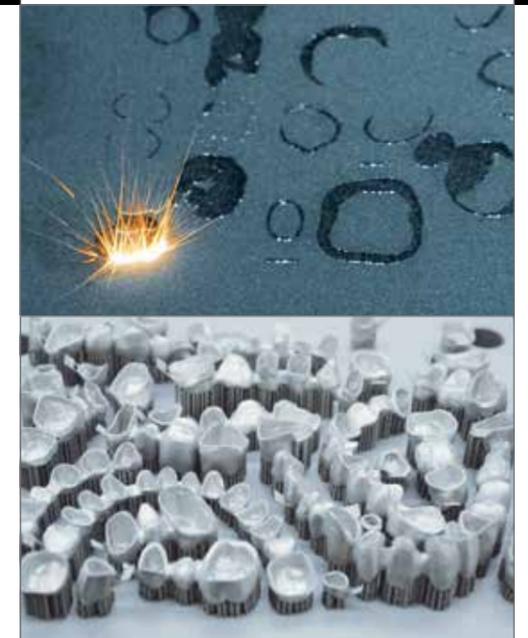

- polvo sumamente fino para estructura homogénea
- estructura densa
- propiedades de material constantes

Una cerámica.



Foto: © Christian Ferrari



Foto: © Christian Ferrari

ceraMotion® Me – la pareja fiable para remanium® star.

remanium® star es la número 1 de las aleaciones para cerámica remanium®. Sobre la base de decenios de experiencia en el desarrollo de cerámicas dentro del grupo Dentaaurum, se desarrolló en colaboración con un grupo de expertos una nueva cerámica de recubrimiento para aleaciones exentas de metales preciosos:

# ceraMotion® Me

Metalocerámica para estructuras metálicas (CET 13,9- 15,1).

ceraMotion® Me es la metalocerámica para todas las aleaciones convencionales exentas de metales preciosos con un valor CET entre 13,9 y 15,1 · 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> (25-500 °C) – naturalmente es también ideal para metales preciosos. Es igualmente apropiada para correcciones de formas y de colores con cerámica prensada o sobreprensada ceraMotion® P+PMe.

Ventajas.

- alta resistencia de unión por la conexión TRC (Tension Reducing Connection)
- no es necesario usar Bonder
- funciona sin cocción de óxido
- no es necesario el enfriamiento lento
- alta vitalidad de color también después de múltiples cocciones
- ilimitadas posibilidades desde la estratificación básica hasta la individualización estética.



Conozca más.

# Grupo Dentaaurum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

➔ Descubra nuestros productos y servicios en [www.dentaaurum.com](http://www.dentaaurum.com)

Fecha de la información: 07/16

Reservado el derecho de modificación



[www.dentaaurum.com](http://www.dentaaurum.com)



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!

**D**  
DENTAURUM