

# El mundo de brackets de Dentaaurum



Conozca la estética en su nueva forma.

## Reivindicación de estética.



### Más de 130 años made in Germany.

Dentaurum es una de las empresas dentales más antiguas del mundo y posee un sinnúmero de patentes en los ámbitos de ortodoncia, ortopedia dentofacial, odontotécnica e implantología. Los materiales de primera calidad son fabricados en la planta de Ispringen, cerca de la Ciudad del Oro, Pforzheim, Baden-Württemberg.

### Máximos rendimientos de precisión.

En la planta de Ispringen son fabricados con la más moderna maquinaria y sistemas actuales de producción todos los brackets de la gran variedad de brackets de Dentaurum, ya se trate de brackets de metal o de cerámica. En el transcurso de los años se ha ido optimizando y perfeccionando todos estos métodos, armonizándolos entre sí. Lo que cuenta es la alta precisión para un empleo seguro y fiable de la terapia de ortodoncia. Con innovadoras tecnologías de producción como el sistema CIM (moldeo por inyección de cerámica), se pueden fabricar los más diversos productos de cerámica, inyectándolos. Es exigencia de Dentaurum de seguir perfeccionando los materiales estéticos a fin de reaccionar de manera óptima al constante aumento de la demanda en el sector de brackets cerámicos.

## [ Made in Germany ]

### Calidad del más alto nivel.

El sistema de gestión profesional de la calidad de la empresa Dentaureum cumple fielmente todos los requisitos legales vigentes para los fabricantes de productos médicos, así como las normas internacionales: 93/42 EWG, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485. Todos los productos son examinados con todo detalle en sus funciones antes de salir de la empresa. Las más pequeñas anomalías pueden ser registradas rápidamente, pudiendo ser remediadas en el proceso de producción. En caso de preguntas sobre los productos o sobre su empleo está a su disposición un equipo experimentado de odontotécnicos y asistentes dentales.

### Servicio de primera clase.

Servicio se escribe en Dentaureum con mayúscula: En Alemania, Austria y Suiza, hay cerca asesores médicos competentes. A nivel mundial estamos a su servicio en sucursales propias y distribuidores. Nos puede localizar personalmente en todo el mundo, pero también en todo momento por internet. El sitio web multilingüe es la plataforma central del Grupo Dentaureum. Aquí están a su disposición un gran sector interactivo de servicios, una mediateca con muchos vídeos y muchas descargas. En la nueva Online Shop puede hacer sus pedidos a toda hora de manera rápida y sencilla. Ya sea por entrega estándar, urgente o con plazo de entrega – le enviamos su mercancía a donde usted quiera. Después de aceptar su pedido necesitamos tan solo 10 minutos para preparar la mercancía para el envío.



Fascinantemente natural.



## Máxima calidad y rendimiento sin compromisos.

discovery® pearl sobrepasa todos los límites conocidos de estética, calidad y rendimiento. Cementado sobre el diente, discovery® pearl se adapta perfectamente al entorno natural en boca gracias a su color y su alta traslucidez.

El bracket consiste completamente de cerámica, sin molestos insertos de metal en el slot. Se ha construido en una sola pieza con los más modernos equipos de producción, según la técnica CIM (moldeo por inyección de cerámica).

La base del bracket se ha adaptado perfectamente a la forma del diente por medio de CAD (diseño asistido por ordenador), gracias a lo que el bracket puede posicionarse con facilidad sobre el diente. Además, el claro sistema compuesto por guías de colocación de diferentes colores y la marcación FDI sobre las bases facilita asignar los brackets a los dientes correspondientes. Asimismo, dichas guías le ayudan a adaptar y colocar los brackets de la forma más sencilla.

Con la innovadora base esculpida por láser, gracias a la que se consigue tanto una buena adherencia como un descementado seguro, discovery® pearl garantiza óptimos resultados terapéuticos, satisfaciendo completamente los requisitos cada vez más rigurosos de la corrección estética dental.

*"LA PERLA ES LA ENCARNACIÓN DE LA BELLEZA NATURAL. SE ORIGINA DENTRO DE UNA CONCHA Y NECESITA TIEMPO HASTA ALCANZAR LA PERFECCIÓN".*

#### **Geometría acreditada de la gama de brackets discovery®**

facilitando la combinación entre los brackets metálicos y cerámicos de discovery® de manera sencilla.

#### **Adaptación cromática perfecta**

al entorno natural en boca, como si no existiese el bracket.

#### **Guías de colocación de diferentes colores**

que facilitan el posicionamiento sobre el diente.

#### **Tamaño óptimo**

pequeño en su diseño y grande en su fuerza, a fin de lograr óptimos resultados terapéuticos.

#### **Base anatómica**

para obtener una perfecta adaptación sobre el diente.

#### **Base estructurada con láser**

con las mejores propiedades de cementado y descementado.





El bracket autoligable dinamique<sup>®</sup> c destaca por su diseño estético. Gracias a la cerámica armonizada, el bracket es casi invisible en la boca. Debido al clip de cromo-cobalto premium con capa de rodio el sistema requiere de menos citas de control y menos tiempo en el sillón durante el tratamiento entero.

Las superficies lisas y los bordes redondeados mejoran la comodidad para el paciente.

La base de los brackets se adapta perfectamente a la anatomía del diente facilitando el posicionamiento del bracket sobre el diente. Para la asignación correcta a los dientes los brackets tienen una marca de color soluble.

La base del bracket está cubierta de una capa de perlas de óxido de aluminio que logra una adherencia mecánica muy fuerte.

**"NADA ES MÁS SUBJETIVO QUE LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA."**

**Marcas de color solubles.**

Asignación sencilla al diente.

**Aplicable de pasivo a activo.**

Control ideal en todas las fases de tratamiento.

**Base de bracket contorneada anatómicamente.**

Ajuste perfecto sobre el diente.

**Base con perlas de óxido de aluminio.**

Buena adherencia y descementado sencillo y previsible.

**Bordes redondeados y óptimo diseño de aletas.**

Comodidad excelente y sencillo de ligar.

**Clip de cromo-cobalto premium con capa de rodio.**

Prolongada vida útil. Abrir y cerrar con facilidad.

**Riel de guía con clip de cierre.**

Seguridad durante el tratamiento completo.

**Adaptación cromática ideal al entorno natural.**

Más estética.





### Elegancia discreta.

Los brackets de policarbonato Elegance® son casi invisibles en boca, debido al empleo de un composite reforzado con fibra de vidrio. Ofrecen una alternativa estética a los brackets cerámicos. El policarbonato especialmente creado para los brackets Elegance® hace posible una gran resistencia a la rotura y al desgaste. Con la ayuda de procesos CAD/CAM se consiguió minimizar la base del bracket.

Las mejores propiedades de deslizamiento del arco en el slot garantiza el canal metálico, que queda totalmente integrado en el policarbonato. En consecuencia no puede fracturar.

La ranura metálica y los ganchos para caninos son de 1 sola pieza, logrando una extraordinaria estabilidad.

Cada bracket Elegance® está marcado individualmente con color, evitando así en la práctica todo tipo de equivocaciones. Las marcas pueden quitarse con facilidad antes de ligar el arco.

*"CUANDO UN PÁJARO PIERDE UNA PLUMA ES COMO QUE NADIE LO NOTA, AL PARECER ES IRRELEVANTE. PERO SI EL VIENTO SE LLEVA LA PLUMA POR LOS AIRES, ESTO PUEDE SER EL INICIO DE UN SUEÑO, DE UNA HISTORIA."*

#### **Excelente adherencia mecánica**

mediante socavados.

#### **Combinación con ranura metálica**

haciendo posibles óptimas propiedades de deslizamiento.

#### **Policarbonato del color del diente**


crea una estética impresionante.

#### **Alta estabilidad**


contra fractura y desgaste.

#### **Marcación individual**

para una asignación rápida.

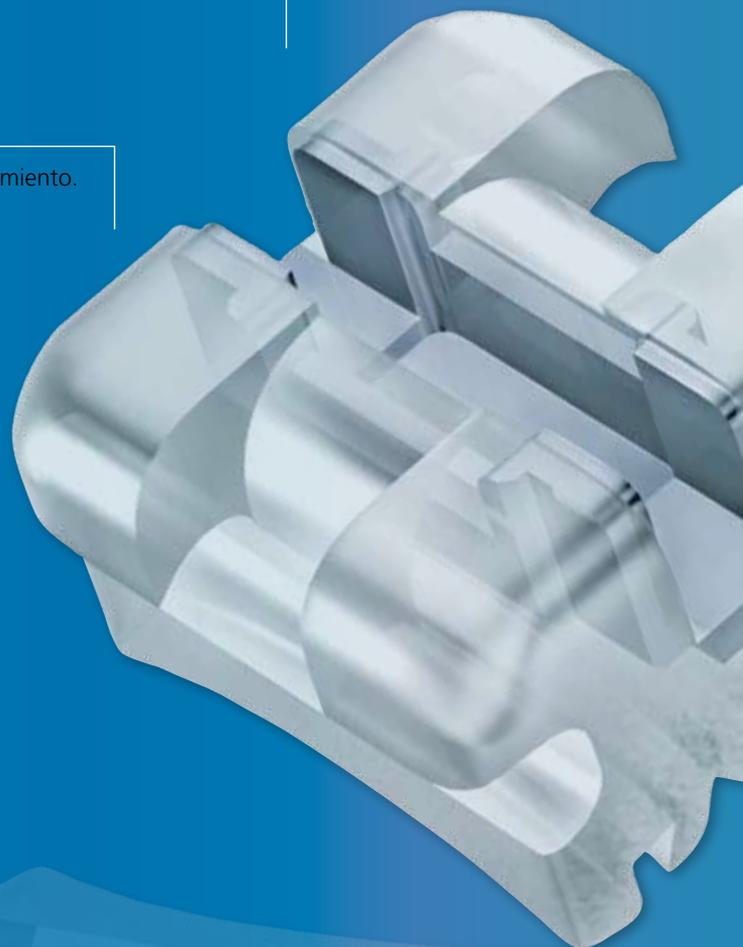



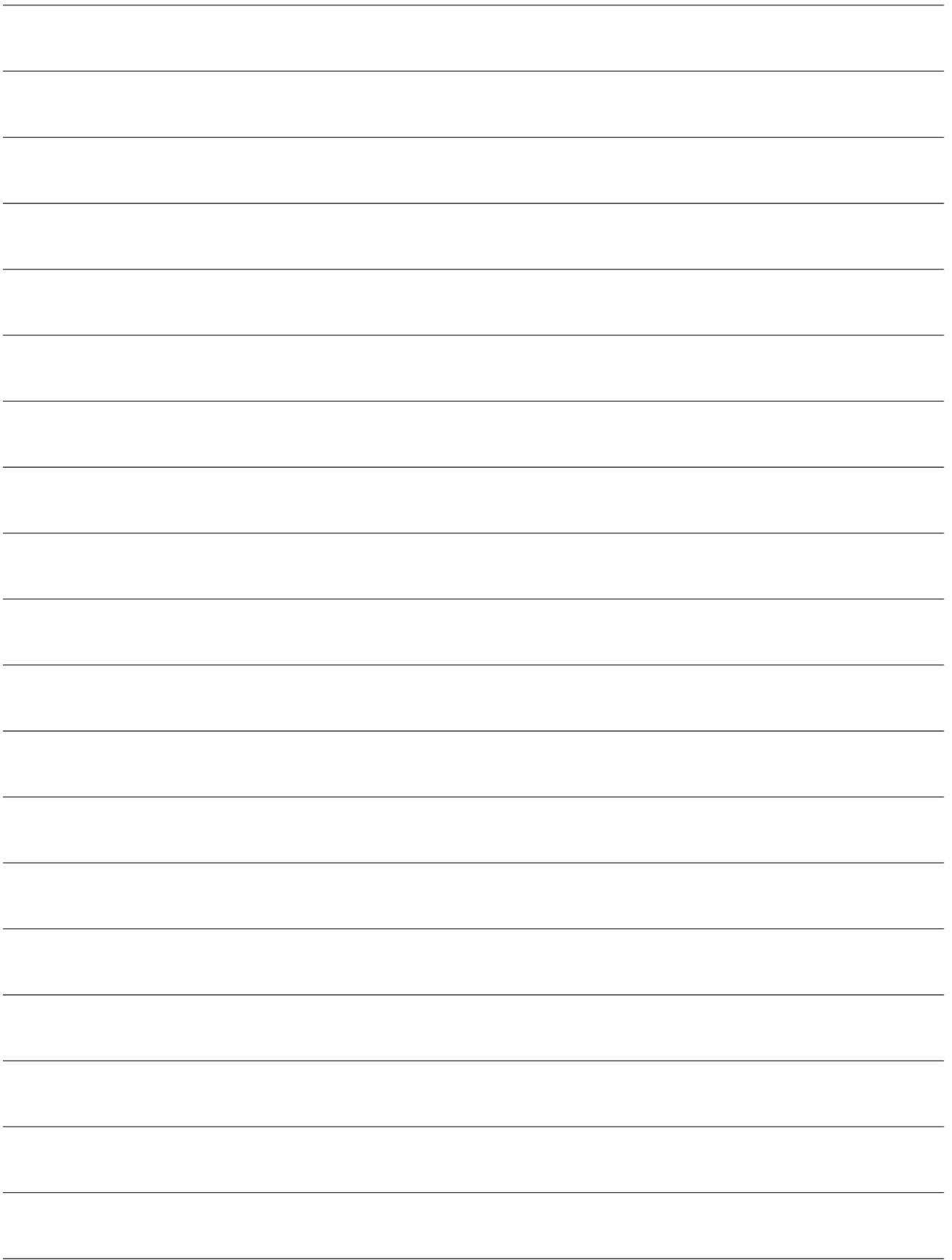

# Grupo Dentaureum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

- ➔ Descubra más informaciones sobre nuestros productos y servicios en [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)
- ➔ Haga sus pedidos de forma fácil y rápida en [Dentaureum Online Shop](#)
- ➔ Considere también nuestra gama especial de cursos.

Fecha de la información: 10/18

Reservado el derecho de modificación



[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

**D**  
DENTAURUM