

# HERBST



Cerniere di ritenzione.  
Sicure. Sperimentate. Efficaci.



## Panoramica delle nostre cerniere di Herbst




*La classica correzione delle distocclusioni.*

Il programma Dentaurum comprende 4 varianti della sperimentata cerniera di Herbst, ognuna con lo stesso denominatore comune: l'ottima finitura dei materiali. Anche se sottoposte a forti carichi, le cerniere Dentaurum garantiscono la massima efficacia terapeutica. Grazie al diretto ancoraggio ai denti pilastro, queste apparecchiature sono in grado di svolgere il proprio compito 24 ore su 24 anche senza la collaborazione del paziente, dando la possibilità di vedere apprezzabili miglioramenti dopo poco tempo dall'inizio del trattamento.



### Herbst I – la classica.

La cerniera Herbst I rappresenta il modello classico da saldare alle bande o a strutture fuse. La tecnica di Herbst può essere impiegata indifferentemente sia con bande che con strutture fuse a seconda dell'indicazione e dell'esperienza dell'utilizzatore.

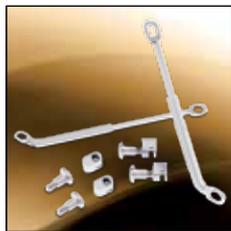

### Herbst II – lo sviluppo.

Il modello classico è stato modificato in questa variante, per consentirne il rapido e semplice montaggio sull'arco dell'apparecchiatura multibrackets. La cerniera di Herbst II può così essere accoppiata direttamente all'apparecchiatura fissa prevista per la terapia di correzione ortodontica.



### Herbst IV – la più confortevole.

Il sistema di articolazione a sfera consente ampi movimenti di lateralità, rendendo la cerniera molto più confortevole per il paziente. Le pratiche C-Clips hanno il compito di fissare l'Herbst IV agli zoccoli saldati sulle bande, in alternativa alle usuali viti a brugola.



### Herbst TS – la variante.

L'Herbst TS è provvista di telescopio interno. Grazie alla sua costruzione compatta, questo modello di cerniera rappresenta l'ottimale soluzione per piccoli mascellari. Viene inoltre impedita la scomposizione della cerniera in due pezzi (ad es. nel caso di ampia apertura della bocca da parte del paziente).

# Tutti i vantaggi del sistema Herbst Dentaurum

# HERBST I



Kit Herbst I (REF 607-120-00)  
su bande



Zoccoli F (forma concava) per  
Herbst I / Herbst TS  
(REF 607-127-30)

Viti a brugola per  
Herbst I / Herbst TS  
(REF 607-122-30)



La chiave a brugola per Herbst I / II / TS  
permette un semplice lavoro alla poltrona  
(REF 607-144-00)

## Terapia rapida.

La normocclusione viene, di norma, raggiunta dopo 6 - 8 mesi, se il paziente viene trattato nel corso del suo picco di crescita puberale. La successiva contenzione con apparecchiatura rimovibile sarà, poi, relativamente breve.

*Rapido. Affidabile. Concreto.*

# HERBST II

Anelli distanziatori per  
Herbst I / II / IV (lunghezza 1 – 5 mm)  
(REF 607-103-00, 1 mm)



Viti a brugola a collo lungo (REF  
607-108-20) e dadi per Herbst II  
(REF 607-111-00)



Kit Herbst II (REF 607-108-00)  
su arco rettangolare  
remanium®

## Terapia affidabile.

La terapia con cerniera di Herbst è particolarmente indicata con i pazienti che non assicurano una costante collaborazione. In questi casi, l'apparecchiatura fissa rimane attiva nell'arco delle 24 ore senza alcuna cooperazione da parte del paziente.

## Minori tempi terapeutici.

L'uso combinato della cerniere di Herbst con apparecchiatura multibrackets permette l'impiego parallelo di differenti fasi terapeutiche. Ciò consente un risparmio di tempo e quindi di denaro.

Un programma per grandi aspettative.

# HERBST IV



Kit Herbst IV (REF 607-115-00)  
su bande



Tubo telescopico con meccanismo a sfera (REF 607-125-00)



Zoccoli per Herbst IV  
(REF 607-118-00)



Moduli di fissaggio (C-Clips) per  
Herbst IV (REF 607-1160-00)

## Terapia esatta.

Grazie alla preparazione extraorale sul modello è possibile regolare l'occlusione finale in modo ottimale e preciso. Ciò rappresenta per il clinico non solo una grande comodità, ma anche la sicurezza del risultato terapeutico.

## Terapia efficace.

La cerniera di Herbst può essere impiegata con successo anche nei casi di asimmetria, mantenendo il trattamento sempre rapido ed efficace. In tal senso si amplia anche lo spettro d'applicazione di questa apparecchiatura ortodontica.

[ *Esatto. Efficace. Completo.* ]

# HERBST TS

Viti a brugola e zoccoli per  
Herbst I / Herbst TS  
(REF 607-122-30 senza zoccoli)



Zoccoli F (forma concava)  
per Herbst I / Herbst TS  
(REF 607-127-30)



Anelli distanziatori (aperti)  
(lunghezza 1 – 4 mm) per Herbst  
TS (REF 607-103-11, 1 mm)



Kit Herbst TS, 22 mm  
(REF 607-126-22) su bande

## Anelli distanziatori (aperti).

Sono disponibili anelli distanziatori di varia lunghezza per tutti i modelli di cerniera di Herbst Dentaurum. Questi permettono l'attivazione del dispositivo secondo necessità in modo rapido, semplice e sicuro.

## Un programma completo.

Per ciascuna variante di cerniera Dentaurum sono disponibili svariati accessori preformati che semplificano il lavoro e permettono, al tempo stesso, di realizzare velocemente e individualmente ciascun dispositivo. Danno, inoltre, la possibilità all'operatore di avere sempre a portata di mano tutto ciò che occorre.

# Il Gruppo Dentaaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

- ➔ Ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi sono disponibili su [www.dentaaurum.com](http://www.dentaaurum.com)
- ➔ Per informazioni sul nostro ampio programma corsi, telefonare al numero 051 861935

Assistenza Clienti Ortodonzia: telefono 051 862580 - E-Mail: [ortodonzia@dentaaurum.it](mailto:ortodonzia@dentaaurum.it) - fax: 051 863291

Ufficio commerciale: telefono 051 862580 - [ordini@dentaaurum.it](mailto:ordini@dentaaurum.it) - fax: 051 863291

Data dell'informazione: 09/17

Soggetto a variazione



[www.dentaaurum.com](http://www.dentaaurum.com)



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

**D**  
DENTAURUM  
ITALIA

Dentaaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)  
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | [www.dentaaurum.it](http://www.dentaaurum.it) | [info@dentaaurum.it](mailto:info@dentaaurum.it)