



PREMIUMLINE



Zangen von Dentaureum

Kraft. Eleganz. Präzision.

D
DENTAURUM
1886



PREMIUMLINE

PRÄZISION & QUALITÄT DIE ÜBERZEUGT – **PREMIUM-LINE ZANGEN**

Willkommen in der Welt der **Premium-Line Zangen von Dentauro** – einem Synonym für hochwertige Produkte und Qualität, gefertigt mit jahrzehntelanger Erfahrung und meisterhafter Präzision. Als eines der traditionsreichsten Unternehmen der Dentalwelt steht Dentauro seit seiner Gründung 1886 für Innovation und Verlässlichkeit, die Kieferorthopäden, Zahntechniker und KFO-Spezialisten weltweit schätzen.

Die Zangen der **Premium-Line** werden mit größter Sorgfalt und Präzision in Deutschland, teilweise in Handarbeit durch langjährig erfahrene Fachkräfte, gefertigt – ein Qualitätsversprechen, das Sie im täglichen Arbeiten in jedem Detail spüren können.

Modernste Fertigungstechnologien und Maschinen treffen hier auf handwerkliches Können und langjähriges Know-how. Das Ergebnis: Zangen, die nicht nur Ihre tägliche Arbeit erleichtern, sondern auch Maßstäbe in Langlebigkeit und Funktionalität setzen. Ob für die festsitzende oder herausnehmbare Kieferorthopädie, ob für den Einsatz in der Praxis oder im Labor, das breite Portfolio deckt alle Einsatzgebiete ab.

Entdecken Sie die hohe Qualität der **Premium-Line Zangen von Dentauro** und lassen Sie sich von den Produkten überzeugen.



Hier finden Sie unsere
Premium-Line Zangen





PREMIUMLINE



Die Premium-Line Zangen von Dentaureum zeichnen sich durch eine Reihe überzeugender Eigenschaften aus, die sie von anderen Zangen im Dentalbereich abheben.

Sie sind speziell entwickelt für die Anwendung in den Bereichen der Kieferorthopädie – egal, ob für die Anwendung in der Praxis am Patientenstuhl oder für Biege- und Schneidarbeiten im Labor.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN FÜR LANGE LEBENSDAUER

Rostfreier, hochlegierter Edelstahl mit optimaler Härte und Verschleißfestigkeit.



BREITES PORTFOLIO

Große Modellauswahl mit optimierten Zangenköpfen für spezifische Anwendungen in Praxis und Labor.



MADE IN GERMANY

Höchste Qualitätsstandards und Präzision aus deutscher Herstellung.



INNOVATIVE HERSTELLUNGS-TECHNIK

Präzise geschmiedete Spitzen und gehärtete Schneid- & Greifflächen für maximale Leistung.



PRÄZISION UND ERGONOMIE

Einfache Handhabung, hohe Präzision und ergonomische Griffe für komfortables Arbeiten.



ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH TRADITION

Dentaureum steht für langjährige Erfahrung, Innovation und höchste Verlässlichkeit im Dentalmarkt.



ANWENDUNGSSICHERHEIT UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Höchste Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise, ergänzt durch umfangreiche Garantie- und Reparaturmöglichkeiten.





PREMIUMLINE

FÜR JEDE TECHNIK

BESTENS GERÜSTET

Premium-Line Zangen sind sowohl für die **feststehende Technik** als auch für die **herausnehmbare Technik** konzipiert. Sie bieten eine umfassende Lösung für vielfältige Anforderungen – im Labor ebenso wie in der Praxis bei der Anwendung direkt am Patienten.

FÜR FESTSITZENDE TECHNIK

- **Ligaturenzangen:**
Zum sicheren Schneiden verschiedener Ligaturen
- **Bracketentfernungszangen:**
Speziell entwickelt, um Brackets schonend zu lösen
- **Bogenbiegezangen:**
Für exaktes Formen und Anpassen von Bögen aus verschiedenen Materialien (z. B. Edelstahl oder Nickel-Titan)

FÜR HERAUSNEHMBARE TECHNIK

- **Biegezangen:**
Ideal für das Anpassen und Formen von Klammern, Bügeln oder anderen Elementen in herausnehmbaren Apparaturen
- **Haltezangen:**
Perfekt für das Handling und die Montage von Kleinteilen
- **Schneidzangen:**
Zum präzisen Kürzen verschiedener Drähte

und viele mehr...

VORTEILE DES BREITEN PORTFOLIOS

- **Anwendungsspezifisch optimiert:**
Jede Zange ist für ihren spezifischen Einsatzbereich entwickelt und bietet maximale Effizienz und Präzision
- **Zeitersparnis:**
Durch die richtige Zange für jede Technik kann der Workflow optimiert werden
- **Vielseitigkeit:**
Die Produktlinie deckt praktisch alle Anforderungen in der kieferorthopädischen Behandlung ab



PREMIUMLINE

FESTSITZENDE TECHNIK



Hier geht es zu den Premium-Line Zangen
für die festsitzende Technik



BÜGELBIEGEZANGE
REF 003-185-00



BÜGELBIEGEZANGE

Für die individuelle Herstellung und
Aktivierung von Lingual- bzw. Palatinalbögen.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,9 mm, hart

REF 003-185-00



BÜGELBIEGEZANGE MAGNUM

Ideal zum Biegen der Außenbögen
von Face Bows.
Max. Drahtstärke: \varnothing 1,8 mm

REF 003-180-01



ADERER DREIFINGERZANGE EXTRA-MINI

Zum Biegen von Drähten/Bögen. Ideal auch
für das Anpassen von Retainerdrähten.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart,
 \varnothing 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25

REF 003-205-00



DISTALSCHNEIDER MINI

Zum Kürzen der Bogenenden
in der Multibrackettechnik.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Grifflänge: 12,0 cm

REF 003-701-00



DISTALSCHNEIDER MINI

Mit längerem Griff für leichteres Handling
beim Kürzen der Bogenenden.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Grifflänge: 14,0 cm

REF 003-702-00



DISTALSCHNEIDER MAXI

Zum Kürzen der Bogenenden
in der Multibrackettechnik.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 003-700-00



WEINGART UNIVERSALZANGE

Zum Positionieren des Bogens und Umbiegen der Bogenenden geeignet. Auch für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart

REF 003-120-00



WEINGART UNIVERSALZANGE MINI

Zum Halten und Positionieren des Bogens.

Sehr grazile Ausführung. Nicht für das Debonding von Brackets geeignet.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart

REF 003-121-00



SEITENSCHNEIDER MEDIUM

Schwarz DLC beschichtet. Glatte Schnittflächen durch exakte Schneidekanten.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 016-153-00



SEITENSCHNEIDER MAXI

Einsätze aus Hartmetall.

Max. Drahtstärke: \varnothing 1,0 mm, hart

REF 004-266-00



DE LA ROSA KONTURENZANGE

Mit Führungsrillen zum Formen von Rund- und Vierkant-Bögen 16, 18, 22.

REF 004-109-00



HAMMERHEAD ZANGE

Zum Umbiegen von Nickel-Titan-Bögen/-Drähten im Molarenbereich.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,45 mm / 18,
 \square 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

REF 003-355-00



PREMIUMLINE



SEITENSCHNEIDER MEDIUM
REF 016-153-00



PREMIUMLINE



OLIVER-JONES BAND-ABNEHMEZANGE
REF 026-347-00



**ANGLE/TWEED
BOGENBIEGEZANGE**

Zum Torquen von Vierkantdrähten.
Verhindert Quetschen des Drahtes
durch paralleles Halten.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 003-442-00



ANGLE DRAHTBIEGEZANGE

In kräftiger Ausführung mit je einer kurzen
flachen und einer runden Backe.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 004-139-00



TWEED-SCHLAUFENBIEGEZANGE

Für besonders feine Biegungen. Mit individuell
auswechselbarer Hartmetallspitze.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,5 mm, hart

REF 012-351-00



LIGATURENSCHNEIDER MINI

Exakt bis zur Spitze schließende Schneiden
garantieren einen glatten Schnitt von
weichen Ligaturendrähten.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,4 mm, weich

REF 014-151-00



**OLIVER-JONES
BAND-ABNEHMEZANGE**

Mit austauschbarer Kunststoffkappe.
Einsatz aus Hartmetall.

REF 026-347-00



BRACKET-ABNEHMEZANGE

Zum Abscheren von Brackets zwischen
Bracketbasis und Adhäsiv.

REF 003-349-00



PREMIUMLINE

HERAUSNEHMBARE TECHNIK



Hier geht es zu den Premium-Line Zangen
für die herausnehmbare Technik



YOUNG SCHLAUFENZANGE
REF 012-074-00



ADAMS ZANGE MAXI

Mit zwei Vierkantbacken, innen glatt.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 003-094-00



ADAMS ZANGE MAXI

Mit einer Vierkant- und einer Rundbacke,
innen glatt.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 004-095-00



HOHLKEHLZANGE MEDIUM

Zum Biegen von kleinen Federn,
Ösen und Schlaufen.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 003-053-00



HOHLKEHLZANGE MAXI

Zum Biegen von Federn, Schlaufen
und Platzhaltern.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 003-233-00



KRAMPONZANGE MAXI

Universal Biege- und Schneidezange.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,9 mm, hart
Schneiden bis: \varnothing 0,7 mm, hart


REF 013-522-00



YOUNG SCHLAUFENZANGE

Eine Universalzange zum Biegen von
Schlaufen in beliebiger Abmessung.
Ideal für Labialbögen.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart


REF 012-074-00

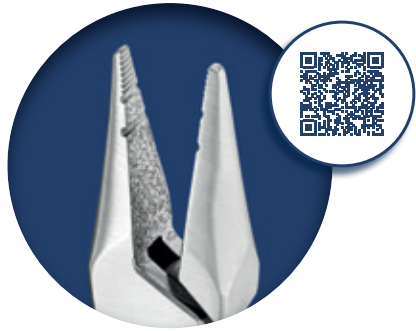

UNIVERSAL DRAHTBIEGEZANGE

Mit geriffelten Spitzen und Führungsrillen.
Hartmetallbeschichtete Arbeitsflächen.
Max. Drahtstärke: \varnothing 0,8 mm, hart

REF 003-290-00

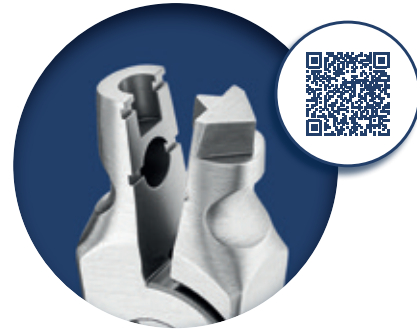

PFEILFORMZANGE

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 012-520-00



ADERER DREIFINGERZANGE MINI

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 003-201-00



SPITZFLACHZANGE

Geriffelt, mit Führungsrille.
Zierliche Maulspitze.

Max. Drahtstärke: \varnothing 0,7 mm, hart

REF 035-455-00



PREMIUMLINE



ADERER DREIFINGERZANGE MINI
REF 003-201-00

PERFEKTION, DIE BESTAND HAT – GARANTIE & SERVICE

Premium-Line Zangen stehen für höchste Präzision, Ergonomie und Langlebigkeit – entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen in der Kieferorthopädie und Zahntechnik. Damit Sie langfristig von dieser Qualität profitieren, bieten wir Ihnen eine umfassende Garantie bei Material- und Herstellungsfehlern und einen erstklassigen Reparaturservice.



REPARATURSERVICE – NACHHALTIGKEIT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die meisten Premium-Line Zangen können zur Reparatur an uns geschickt werden. Unser professioneller Reparaturservice stellt sicher, dass Ihre Zangen instandgesetzt werden. Ob Nachschleifen oder der Austausch von Einsätzen – wir sorgen dafür, dass Ihre Arbeitsinstrumente wieder in einwandfreiem Zustand sind. Zu fairen Konditionen. So sparen Sie die Kosten für einen Ersatz und tragen aktiv zur Nachhaltigkeit bei. Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot.



UNSERE GARANTIE – IHR VERTRAUEN

Mit dem Kauf einer Premium-Line Zange von Dentauroum entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Instrument. Wir gewähren auf Material- und Herstellungsfehler eine Garantie von 10 Jahren*. Die Garantie greift nicht bei normaler Abnutzung der Zange oder unsachgemäßer Behandlung der Zange.



Bitte beachten Sie die aktuellen Garantiebedingungen.

*10 Jahre Garantie auf Material und Herstellungsfehler, auf Herausfallen der Einsätze, auf Bruch und Korrosion des Zangenkörpers bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und sachgemäßer Pflege. Bei Manipulation erlischt der Garantiespruch.

PFLEGEHINWEISE – FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

Damit Sie möglichst lange von der Präzision und Leistungsfähigkeit Ihrer Premium-Line Zangen profitieren, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege.

Die Dentauroum Premium-Line Zangen eignen sich für alle üblichen Desinfektions- und Reinigungsarten gemäß den Anwendungsvorschriften der jeweiligen Hersteller dieser Geräte.



Hier finden Sie die ausführlichen Informationen zur Pflege und Aufbereitung der Premium-Line Zangen



REINIGUNG

Nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser abspülen und mit einer weichen Bürste reinigen. Keine aggressiven Chemikalien verwenden. Niemals mit harten Gegenständen arbeiten.



PFLEGE

Regelmäßiges Ölen der Zangenschlüsse, Sperren, Gleitflächen und anderer kritischer Stellen sichert eine lange Lebensdauer und Gebrauchsfähigkeit. Dazu empfehlen wir das Dentauroum Pflege-/Schutzöl (REF 055-201-00).



DESINFEKTION

Geeignete, pH-neutrale Desinfektionsmittel nutzen, um Materialschäden zu vermeiden. Maximale Einlegezeit (niemals über das Wochenende/die Nacht!) beachten!



STERILISATION

Autoklavengeeignet – bitte die Herstellerangaben zur maximalen Temperatur beachten.



LAGERUNG

Trocken und gut belüftet aufbewahren, um Korrosion zu verhindern.



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE +49 72 31/803 - *Durchwahl*
Kieferorthopädie -550
Customer Support Digital -280
Auftragsannahme -210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM