

COMPACT
SMOOTH &
SMALL
#SMART

discovery[®]
SMART



D
DENTAURUM
1886

INDIVIDUAL
SMOOTH
SMALL.
#SMART





30
years
discovery®

discovery®
SMART

La línea Premiun de brackets discovery® sintetiza su larga experiencia con un diseño preciso y una terapia de brackets de gran calidad. Con el **discovery® smart** aumentó la familia de brackets un bracket que se ha consolidado de forma convincente en la rutina clínica diaria, pequeño y estético, funcional y creado para conseguir un tratamiento a nivel superior.

La curvatura del slot por mesio-distal del **discovery® smart** se adapta perfectamente a la forma natural de la arcada dental. De este modo, cada bracket recibe una curvatura de slot individual. Minimizando también la fricción en el bracket. El slot estable cercano del diente mejora el control de la rotación y garantiza un movimiento suave y guiado del diente.

Los brackets son un 20% más pequeños que los discovery® clásicos, sensación agradable y más cómodos en la boca del paciente.



¡Descubra más online!



El **discovery® smart** se elabora de una pieza en la sede de Dentaurum en Ispringen, en instalaciones ultramodernas y complejas mediante el proceso de moldeo por inyección de metal MIM (Metal Injection Molding) – Made in Germany.

Su perfil bajo, un in/out de tan solo 0,7 mm y sus aletas ergonómicas confieren al bracket su característica precisión.

El **discovery® smart**, gracias a su diseño compacto y moderno, aúna todas las características probadas de la familia discovery®. Por lo tanto, es sinónimo de gran funcionalidad y ofrece un control preciso con una estética fascinante.

#SMART

20% más pequeño que discovery® y uno de los brackets más pequeños del mundo.



AN
WI
AS
FD

NATOMIC BASE
TH PATENTED
ER 13 FIGURE
DI TECHNIQUE
#SMART



ALL FEATURES
MANY BENEFIT
SMILE, BRACE
#SMART



**Importante reducción
de tamaño**

20% más pequeño que discovery® y
uno de los brackets más
pequeños del mundo

**Excelentes propiedades
de deslizamiento.**

Slot mesio/distal curvado alineado con el arco ideal



Detalles Smart



Higiénicos & envasados en blíster

Desde el 2018 los clientes pueden hacer el pedido de los discovery[®] smart envasado higiénicamente en blíster y con película protectora. Los brackets se someten a un laborioso proceso de limpieza que recorre hasta 7 etapas. En un proceso automatizado, los robots colocan los brackets en la posición correcta según su marcación FDI dentro del blíster. Al término serán sellados higiénicamente con dos láminas.

Terapia & manejo

Los amplios socavados de las aletas permiten la utilización de todo tipo de ligaduras. El bajo valor de in/out es compatible con todos los brackets discovery[®] - sin necesidad de doblez de compensación. La base del bracket está estructurada con láser y marcación FDI patentada además anatómicamente adaptada en 3D-CAD lo que garantiza la colocación fácil y sencilla.

EASY TO USE FUNCTIONAL & EFFICIENT SMART



Eficiencia & control

Gracias a un slot curvado individualmente se minimiza la fricción en el bracket. El slot estable cercano al diente mejora el control de la rotación y garantiza un movimiento suave y guiado del diente.

Calidad & biocompatibilidad

El preciso proceso MIM con polvo metálico de grano fino garantizan un alto grado de precisión de ajuste, superficies lisas y estabilidad. - sin soldaduras para una gran biocompatibilidad.

Amplia selección



ORTHOCAST M-SERIES

Perfectos en función y diseño

Las Ortho-Cast M-Series combinan una alta biocompatibilidad con un diseño de una sola pieza. Su diseño plano facilita su manejo y garantiza una gran comodidad. La base esculpida por láser en 3D-CAD garantiza una retención segura y su marcación FDI facilita la asignación. Los ganchos de bola ofrecen gran flexibilidad de adaptación para un tratamiento personalizado.



ORTHOCAST MINI M-SERIES

A medida & bien pensado

Los tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini - creados especialmente para la técnica de cementado - destacan por su diseño delicado. Son ideales para los molares en erupción.

Más accesorios
tales como arcos los
encontrará aquí:



FIND COMBIN



YOUR
NATION
PERFECT
MATCH!
SMART




discovery[®]
SMART SL



discovery[®]
SMART



discovery[®]

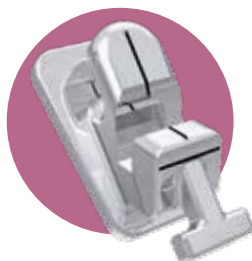

discovery[®]
DELIGHT



discovery[®]
PEARL



CONTACTO
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen Alemania



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



TIENDA ONLINE
SHOP.DENTAURUM.COM