



PREMIUMLINE



## Alicates de Dentaaurum

Fuerza. Elegancia. Precisión.

**D**  
DENTAURUM  
1886



PREMIUMLINE



CORTADOR DISTAL MINI & ALICATES YOUNG PARA FORMAR ANSAS  
REF 003-702-00 & REF 012-074-00

# PRECISIÓN & CALIDAD CONVINCENTE – **PREMIUM-LINE** **ALICATES**

Bienvenidos al mundo de los **alicates Premium-Line de Dentaureum** – sinónimo de productos de alta calidad, fabricados con décadas de experiencia y una precisión magistral. Como una de las empresas con más tradición del mundo dental, Dentaureum es, desde su fundación en 1886, sinónimo de innovación y confianza apreciada por ortodoncistas, técnicos dentales y especialistas en ortodoncia de todo el mundo.

Los alicates **Premium-Line** se fabrican en Alemania con el mayor cuidado y precisión, están parcialmente trabajados a mano por especialistas con muchos años de experiencia. Un compromiso de calidad que se hace ver en cada detalle del trabajo cotidiano. Una combinación perfecta de las tecnologías y maquinarias de producción más avanzadas con la artesanía y los años de experiencia. El resultado: alicates que no solo son la ayuda perfecta en su trabajo cotidiano, sino que además también establece cánones en términos de durabilidad y funcionalidad. Ya sea tanto para la ortodoncia fija o removible, como para su utilización en la consulta o en el laboratorio, la completísima gama cubre todas las necesidades.

Descubra la gran calidad de los **alicates Premium-Line de Dentaureum** y déjese cautivar por los productos.



Aquí encontrará nuestros  
**alicates Premium-Line**







# PREMIUMLINE



Los alicates Premium-Line de Dentaurem destacan por una serie de características convincentes, que las diferencian del resto de alicates del mercado.

Están especialmente diseñadas para su utilización en los campos de la ortodoncia – tanto para su uso en la consulta en la silla del paciente como para doblar y cortar en el laboratorio.





## **MATERIALES DE ALTA CALIDAD PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL**

acero inoxidable de alta aleación con la dureza y resistencia óptima al desgaste.



## **AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS**

Gran variedad de modelos con puntas de alicate optimizadas para aplicaciones específicas en la consulta o en el laboratorio.



## **MADE IN GERMANY**

Elevados estándares de calidad y precisión de fabricación alemana.



## **TÉCNICA DE FABRICACIÓN INNOVADORA**

Puntas forjadas con precisión y filos de corte & agarres endurecidos.



## **PRECISIÓN Y ERGONOMÍA**

Fácil manejo, alta precisión y empuñaduras ergonómicas para trabajar cómodamente.



## **FIABILIDAD BASADA EN LA TRADICIÓN**

Dentaurum representa años de experiencia, innovación y un alto nivel de confianza en el mercado dental.



## **UTILIZACIÓN SEGURA Y MANTENIMIENTO SENCILLO**

Su construcción robusta le otorga un alto grado de fiabilidad, complementado con una amplia garantía y posibilidades de reparación.





PREMIUMLINE

# PARA CUALQUIER TÉCNICA

PERFECTAMENTE EQUIPADO

Los alicaten Premium-Line son aptos tanto para la técnica fija como para la removable. Ofrecen muchas soluciones para cualquier necesidad – tanto en el laboratorio como en la consulta directamente utilizado en el paciente.



## PARA LA TÉCNICA FIJA

- **Alicate para ligaduras:**

Para una sujeción y montaje seguros

- **Alicates para la extracción de brackets:**

Especialmente diseñados para la extracción delicada de los brackets

- **Alicates para doblar arcos:**

Para dar forma y adaptar los arcos de diferentes materiales (por ejemplo, acero inoxidable o níquel-titanio)

## PARA LA TÉCNICA REMOVIBLE

- **Alicates para doblar alambres:**

Ideal para dar la forma y adaptar los ganchos, barras u otros elementos en los aparatos removibles

- **Tenazas de sujeción:**

Para el manejo y montaje perfecto de piezas pequeñas

- **Alicates de corte:**

para acortar alambres con precisión

**y mucho más...**

## VENTAJAS DE LA AMPLIA GAMA

- **Soluciones orientadas a aplicaciones específicas:**

Cada alicate está diseñado para un trabajo específico lo que optimiza su máxima eficacia y precisión

- **Ahorro de tiempo:**

Gracias al uso del alicate adecuado específicamente para cada técnica se optimiza el flujo de trabajo

- **Versatilidad:**

La línea de productos cubre prácticamente todas las necesidades para cualquier tratamiento ortodóncico





PREMIUMLINE

# TÉCNICA FIJA



Haga clic aquí para acceder a los alicates  
Premium-Line para la técnica fija



ALICATES PARA DOBLAR BARRAS  
REF 003-185-00



### **ALICATES PARA DOBLAR BARRAS**

Para hacer y activar barras palatinas y linguales individuales.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,9 mm, duro

**REF 003-185-00**



### **ALICATES PARA DOBLAR BARRAS MAGNUM**

Ideales para doblar los arcos exteriores de los arcos faciales.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  1,8 mm

**REF 003-180-01**



### **ALICATES ADERER DE TRES PICOS EXTRA-MINI**

Para doblar alambres / arcos. Ideales también para la adaptación de alambres para retenedores.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro,  
 $\varnothing$  0,48 x 0,64 mm / 19 x 25

**REF 003-205-00**



### **ALICATES DE CORTE DISTAL MINI**

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica multibracket.

Espesor o calibre máx. del alambre:

$\varnothing$  0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Longitud del mango: 12,0 cm

**REF 003-701-00**



### **ALICATES DE CORTE DISTAL MINI**

Con mango más largo para mayor facilidad de acortamiento de los extremos de los arcos.

Espesor o calibre máx. del alambre:

$\varnothing$  0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Longitud del mango: 14,0 cm

**REF 003-702-00**



### **CORTADOR DISTAL MAXI**

Para acortar los extremos de los arcos en la técnica multibracket.

Espesor o calibre máx. del alambre:

$\varnothing$  0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

**REF 003-700-00**



### **ALICATES UNIVERSALES WEINGART**

Para la colocación del arco y para doblar los extremos del arco. También apropiados para quitar brackets.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro

**REF 003-120-00**



### **ALICATES UNIVERSALES WEINGART MINI**

Para sujetar y posicionar el arco.

Tipo muy fino. No apto para el descementado de brackets.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro

**REF 003-121-00**



### **ALICATES DE CORTE LATERAL MEDIUM**

Acabado DLC negro. Superficies de corte lisas, gracias a los bordes de corte exactos.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 016-153-00**



### **ALICATES DE CORTE LATERAL MAXI**

Insertos de metal duro.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  1,0 mm, duro

**REF 004-266-00**



### **ALICATES DE LA ROSA PARA CONTORNEAR**

Con surcos de guía para el contorneado de arcos redondos y rectangulares 16, 18, 22.

**REF 004-109-00**



### **ALICATES HAMMERHEAD**

Para doblar arcos / alambres de níquel-titanio en el sector de molares.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,45 mm / 18, mm,  
 $\varnothing$  0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

**REF 003-355-00**





PREMIUMLINE



ALICATES DE CORTE LATERAL MEDIUM  
REF 016-153-00



PREMIUMLINE



ALICATES OLIVER-JONES PARA QUITAR BANDAS  
REF 026-347-00





#### **ALICATES ANGLE / TWEED PARA DOBLAR ARCOS**

Para la torsión (torque) de alambres rectangulares. Impide el aplastamiento del alambre gracias a la sujeción paralela.

Espesor o calibre máx. del alambre:

☑ 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

**REF 003-442-00**



#### **ALICATES ANGLE PARA DOBLAR ALAMBRES**

Modelo fuerte con puntas cortas cónica y piramidal respectivamente.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 004-139-00**



#### **ALICATES TWEED PARA FORMAR ANSAS**

Para flexiones especialmente finas. Con punta de metal duro intercambiable individualmente.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,5 mm, duro

**REF 012-351-00**



#### **ALICATES PARA CORTAR LIGADURAS MINI**

Los filos de cierre exacto hasta la punta garantizan un corte liso de los alambres para ligaduras blandos.

Espesor o calibre máx. del alambre:

$\varnothing$  0,4 mm, blando

**REF 014-151-00**



#### **OLIVER-JONES ALICATE PARA QUITAR BANDAS**

Con casquillo de composite intercambiable. Inserto de metal duro.

**REF 026-347-00**



#### **ALICATES PARA QUITAR BRACKETS**

Para el cizallamiento de brackets de cementado directo entre la basedel bracket y el adhesivo.

**REF 003-349-00**





PREMIUMLINE

# TÉCNICA REMOVIBLE



Haga clic aquí para acceder a los alicates  
Premium-Line para la técnica removible



ALICATES YOUNG PARA FORMAR ANSAS  
REF 012-074-00



#### **ALICATES ADAMS MAXI**

Con dos picos piramidales,  
interiormente lisos.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**REF 003-094-00**



#### **ALICATES ADAMS MAXI**

Con picos cónico y piramidal,  
interiormente lisos.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**REF 004-095-00**



#### **ALICATES ACANALADOS MEDIUM**

Para doblar pequeños resortes,  
ojalillos o ansas.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 003-053-00**



#### **ALICATES ACANALADOS MAXI**

Para doblar resortes, ansas y mantenedores  
de espacio.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**REF 003-233-00**



#### **ALICATES PARA DOBLAR ALAMBRES MAXI**

Alicates universales para doblar y cortar.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,9 mm, duro

Corte hasta:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 013-522-00**




#### **ALICATES YOUNG PARA FORMAR ANSAS**

Alicates universales para hacer ansas  
de cualquier medida requerida.

Ideales para arcos labiales.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 012-074-00**

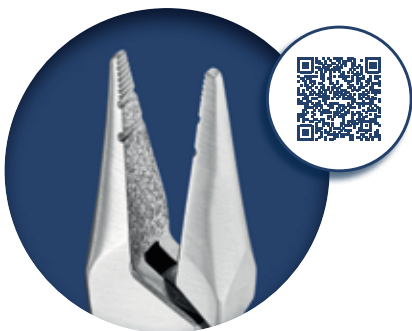


#### **ALICATES UNIVERSALES PARA DOBLAR ALAMBRES**

Con puntas estriadas y con surcos de guía.  
Puntas de trabajo.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,8 mm, duro

**REF 003-290-00**

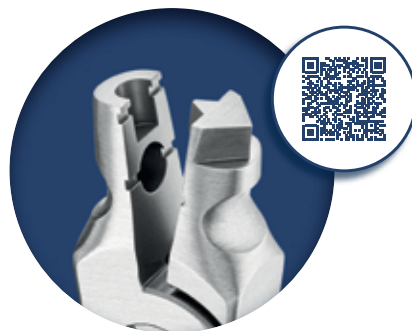

#### **ALICATES PARA FORMAR GANCHOS FLECHA**

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 012-520-00**



#### **ALICATES ADERER DE TRES PICOS MINI**

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 003-201-00**



#### **ALICATES DE PICOS PLANOS**

Interior liso, con ranura de guía.

De picos finos.

Diámetro máx. del alambre:  $\varnothing$  0,7 mm, duro

**REF 035-455-00**





PREMIUMLINE



ALICATES ADERER DE TRES PICOS MINI

REF 003-201-00

# PERFECCIÓN, QUE DURA GARANTÍA & SERVICIO

Los alicates Premium-Line representan alta precisión, ergonomía y durabilidad – para satisfacer los requerimientos más exigentes de la prótesis dental y la ortodoncia. Para que se beneficie de esta calidad a largo plazo, le ofrecemos una amplia garantía por defectos de material y fabricación y un servicio de reparaciones de primera clase.



## SERVICIO DE REPARACIONES – SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ECONÓMICA

La mayoría de los alicates Premium-Line puede enviarnoslos para su reparación. Nuestro servicio profesional de reparación se encarga de la reparación de sus alicates. Ya sea para rectificar o sustituir insertos - nos aseguramos de que sus herramientas de trabajo vuelvan a estar en perfectas condiciones. En condiciones razonables. De esta manera se ahorra los costes de la compra de uno nuevo y también contribuye activamente a la sostenibilidad. Contacte con nosotros y le haremos una oferta.



## NUESTRA GARANTÍA – SU CONFIANZA

Con la compra de un alicate Premium-Line de Dentaurum ha optado por un instrumento de alta calidad. Concedemos una garantía de 10 años\* por fallos de material y fabricación. La garantía no es aplicable al desgaste normal o manipulación inadecuada del alicate.



Tenga en cuenta las condiciones de garantía vigentes.

\*10 años de garantía para el material y fallos de fabricación, por un desprendimiento de los insertos, en caso de fractura y corrosión del cuerpo del alicate solo si a sido utilizada correctamente y se ha cuidado de forma adecuada. Manipulaciones inapropiadas anulan la garantía.

## CONSEJOS PARA EL CUIDADO – PARA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA

Para que pueda beneficiarse de la precisión y el rendimiento de su **alicate Premium-Line** durante el mayor tiempo posible le recomendamos un cuidado periódico. Los alicates **Premium-Line** de Dentaureum son aptos para todos los procesos de desinfección y limpieza convencionales de acuerdo con las instrucciones de uso de los respectivos fabricantes de estos dispositivos.



Aquí encontrará la información detallada para el cuidado y mantenimiento de los alicates Premium-Line



### LIMPIEZA

Después de cada uso enjuague con agua corriente y limpie con un cepillo suave. No use productos de químicos de limpieza que sean agresivos. Nunca trabaje con objetos duros.



### CUIDADOS

La lubricación regular de las partes móviles de los alicates, como las articulaciones, las partes de fricción y otros puntos críticos, garantiza que las pinzas se mantengan en buen estado. Para ello recomendamos el aceite de protección y cuidado de Dentaureum (REF 055-201-00).



### DESINFECCIÓN

Para evitar daños al material, utilice desinfectantes adecuados con un pH neutro. Tenga en cuenta el tiempo máximo de sumergido (nunca durante un fin de semana / noche).



### ESTERILIZACIÓN

Apto para el autoclave – Observe las indicaciones del fabricante en cuanto a la máxima temperatura.



### ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y bien ventilado para evitar la corrosión.



CONTACT  
**DENTAURUM**

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31  
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com  
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP  
SHOP.DENTAURUM.COM