



ORTHOCAST
M-SERIES

L'AVANTAGE
EST DANS LES DÉTAILS.



D
DENTAURUM
1886

ORTHOCAST
M-SERIES



Ortho-Cast M-Series

Les tubes vestibulaires
haut de gamme.

Ortho-Cast M-Series
non convertible



simple
rectangulaire

Ortho-Cast M-Series
convertible



simple
rectangulaire

Ortho-Cast M-Series mini
non convertible



simple
rectangulaire



double
rectangulaire

ORTHOCAST

M-SERIES

Parfaite harmonie entre design et fonction.

Les tubes vestibulaires, tout comme les brackets Dentaurum, sont conçus et fabriqués en recourant aux procédés les plus modernes.

Les tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series offrent à l'utilisateur un large éventail de fonctionnalités pour une mise en œuvre facile et sûre. De plus, le praticien bénéficie de la plus grande liberté de choix pour un traitement individuel : Ortho-Cast M-Series en version simple rectangulaire ou double rectangulaire, convertible ou non convertible, à coller et à souder.*

Points phares :

- Nouveau : double et triple, convertible, à souder.
- Tube vestibulaire monobloc offrant une grande biocompatibilité.
- Base 3D structurée au laser pour un maintien parfait et une assise optimale.
- Marquage + (maxillaire) / - (mandibule) et numérotation FDI pour les tubes à coller en vue d'une assignation facile du tube à la dent.
- Crochets boucles pliables pour un traitement personnalisé et flexible.



Base brevetée et
structurée au laser
avec numérotation
FDI !

*Tous les tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series à souder ainsi que les bagues correspondantes sont disponibles dans notre catalogue actuel ou sur notre site web.

ORTHOCAST
M-SERIES

simple rectangulaire
non convertible*

Crochet boucle pliable

offrant un maximum de confort au patient.

Encoche distale

permettant d'accrocher des éléments supplémentaires tels que les ligatures en 8.

Base anatomique

assurant la meilleure assise possible.

Contour vestibulaire

pour un positionnement facile sur la dent.

Encoche pour précelle

facilitant la pose.

Ouverture en entonnoir

facilitant l'introduction de l'arc.

Base structurée au laser avec numérotation FDI

pour une adhérence optimale et une identification facile.

* Aussi disponible pour la mandibule en version MBT 7.



ORTHOCAST
M-SERIES

simple rectangulaire
convertible

Crochet boucle pliable

offrant un maximum de confort au patient.

Encoche pour précelle

facilitant la pose.



Couvercle de conversion innovant

pour plus de flexibilité dans la conduite du traitement. Le couvercle s'enlève rapidement et facilement.

Ailes arrondies

synonymes de grand confort pour le patient.

Base anatomique

assurant la meilleure assise possible.

Contour vestibulaire

pour un positionnement facile sur la dent.


Base structurée au laser avec numérotation FDI

pour une adhérence optimale et une identification facile.

ORTHOCAST
M-SERIES

double rectangulaire
non convertible

Crochet boucle pliable
offrant un maximum de confort au patient.

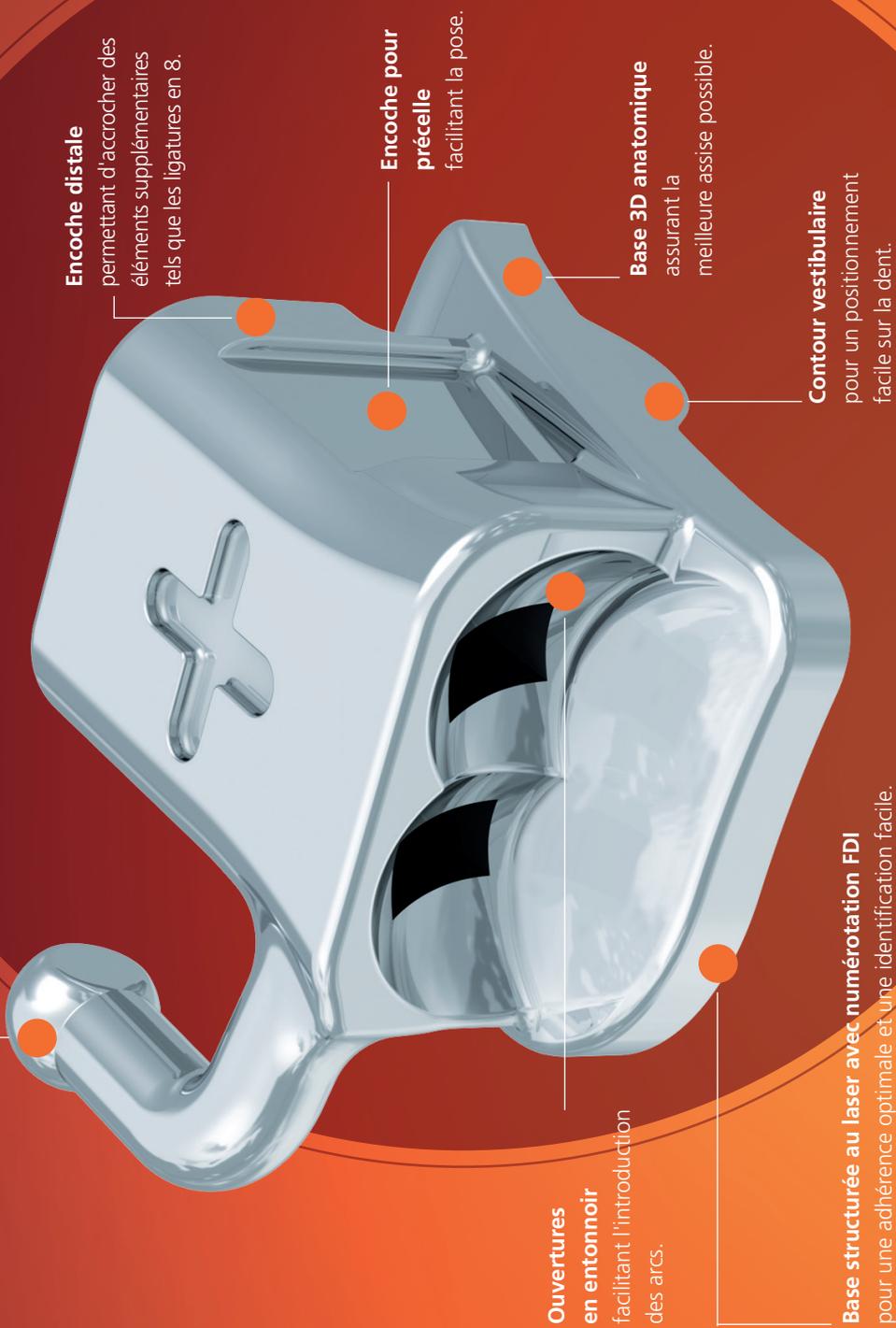

Encoche distale
permettant d'accrocher des
éléments supplémentaires
tels que les ligatures en 8.

**Encoche pour
précelle**
facilitant la pose.

Base 3D anatomique
assurant la
meilleure assise possible.

Contour vestibulaire
pour un positionnement
facile sur la dent.

**Ouvertures
en entonnoir**
facilitant l'introduction
des arcs.

Base structurée au laser avec numérotation FDI
pour une adhérence optimale et une identification facile.

ORTHOCAST
M-SERIES

double rectangulaire
convertible

Couvercle de conversion innovant
pour plus de souplesse dans la conduite du traitement.
Le couvercle s'enlève rapidement et facilement.

Ailes arrondies

synonymes de grand confort pour le patient.

Crochet boule pliable

offrant un maximum de confort au patient.

Encoche pour précelle


facilitant la pose.

Base anatomique

assurant la meilleure assise possible.

Base structurée au laser avec numérotation FDI

pour une adhérence optimale et une identification facile.

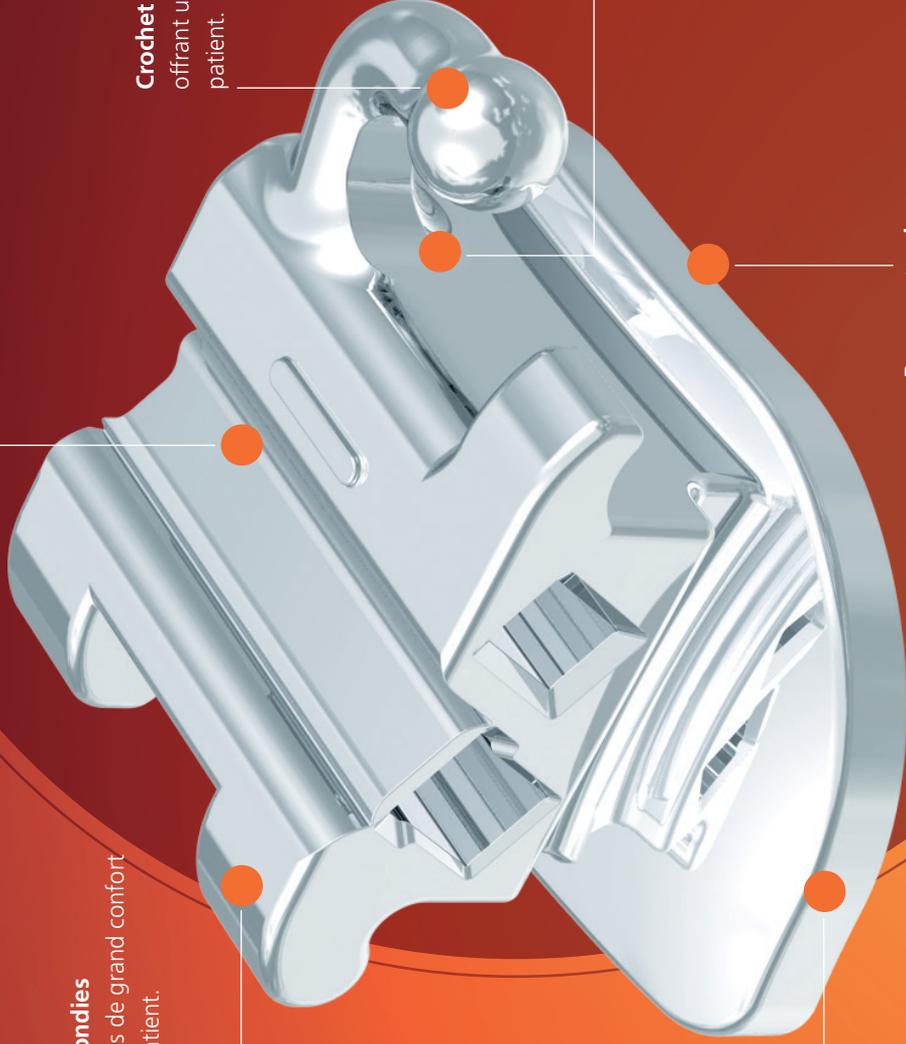

ORTHOCAST **INI**
M-SERIES

simple rectangulaire
non convertible*

Crochet boucle pliable

offrant un maximum de confort au patient.

Design gracieux

Assignment facile du tube à la dent
+ (maxillaire)

Ouverture en entonnoir
facilitant l'introduction de l'arc.

Base 3D anatomique
assurant la meilleure assise possible.

Positionnement facile et sûr sur la cuspidé mésio-vestibulaire.

La solution idéale pour les nouvelles molaires en phase d'éruption.

Base structurée au laser avec numérotation FDI
pour une adhérence optimale et une identification facile.

ORTHOCAST
M-SERIES

Ortho-Cast M-Series
Accessoires





Pose facile

avec notre précelle spéciale
(REF 025-280-00).



Dépose facile des tubes vestibulaires à coller

avec la pince à retirer les brackets coudée
(REF 004-347-00).



Conversion optimale

avec la pince à déconvertir assortie
(REF 003-805-00).



Dépose facile des bagues

avec la pince à débagger Oliver-Jones
(REF 026-347-00).

Aperçu du produit

ORTHOCAST
M-SERIES

À coller

simple rectangulaire

Ortho-Cast M-Series mini 18/22
non convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevis**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevis**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevis**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevis**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevis**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevis**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise



Ortho-Cast M-Series 18/22

non convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



CE 0483

Maxillaire



Mandibule

Gorge 18 : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

À coller

simple rectangulaire

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevis,**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevis,**



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevis,**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevis,**

CE 0483

● Maxillaire

● Mandibule

Gorge 18 : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

double rectangulaire

Ortho-Cast M-Series 18/22 non convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largueur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi,**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi,**



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largueur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi,**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi,**

CE 0483

Maxillaire



Mandibule



Gorge 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 - gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 Gorge 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 - gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 ** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

À coller

double rectangulaire

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · quantité : 10 pièces

Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevis,**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevis,**



Dents	Torque	Distal Offset	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevis,**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevis,**

CE 0483

● Maxillaire

● Mandibule

Gorge 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 Gorge 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · gorge tube auxiliaire : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
 ** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Découvrir
plus maintenant.

D
DENTAURUM
1 8 8 6



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Allemagne



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+497231/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM