

Moins de travail –
plus d'esthétique



ceraMotion®_{Ti}

Cliché de : © Christian Ferrario®

ceraMotion® Ti

Céramique cosmétique pour armatures en titane
ou alliage de titane



D
DENTAURUM

ceraMotion® Ti

Céramique cosmétique pour armatures en titane ou alliage de titane

La céramique de stratification ceraMotion® Ti a été conçue pour le recouvrement des infrastructures réalisées en titane ou alliage de titane. En raison de sa grande affinité pour l'oxygène, et de son très faible coefficient de dilatation thermique compris entre $9,6$ et $10,3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25-500 °C), le recouvrement du titane (pur ou allié) nécessite une céramique cosmétique bien spécifique, adaptée à ces deux caractéristiques.

- ▷ Adhésion optimale à l'infrastructure grâce à l'agent de liaison employé (bonder), bien spécifique (42 MPa)
- ▷ Céramique conçue sur la base d'une céramique de qualité éprouvée, la Triceram®
- ▷ excellente résistance à la flexion : 115 MPa (Dentin)
- ▷ une céramique très facile à stratifier
- ▷ Masses opalescentes/fluorescentes/translucides garantes d'une esthétique comparable à celle de la dent naturelle


L'ensemble de ces propriétés, pour toutes les lignes de produits, fait de ce système de céramique ceraMotion® un produit particulièrement avantageux : Esthétique parfaite, sécurité et économie

Une meilleure esthétique est obtenue grâce au concept innovant Touch Up avec des contraintes de travail réduites au minimum. Le concept hybride ceraMotion® permet de gagner en efficacité grâce à une technique de stratification identique pour tous les matériaux pour armatures. Les céramiques pressées ceraMotion® se marient parfaitement avec les matériaux cosmétiques. Une stabilité maximale de la teinte est obtenue grâce au procédé de coloration thermique. Le concept Chroma (inclus dans le système de céramique ceraMotion®) est également remarquable car il permet de disposer d'une grande diversité de teintes naturelles. Le procédé de production spécial permet d'obtenir une stabilité exceptionnelle des formes et des angles ainsi qu'un coefficient de dilatation thermique constant. Le concept de céramiques ceraMotion® prouve qu'il est possible de conserver une excellente visibilité, même avec un programme de produits très important. Les performances uniques du système de céramiques ceraMotion® sont basées sur le spectre de compétences hors pair du groupe Dentaureum : Développement et fabrication de céramiques, d'alliages et de revêtements couplés à une offre de services exemplaire.





Cliché de : © Christian Ferraro

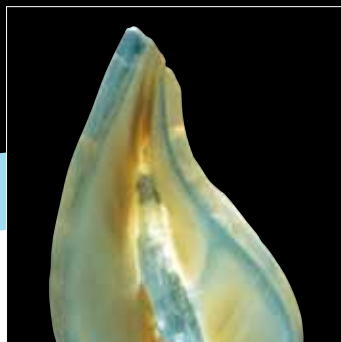

Moins de travail –
plus d'esthétique



Vue d'ensemble des produits ceraMotion® Ti

Bonder	B	Powder
Paste Bonder	PB	Paste
Opaque	O	A-D
Opaque Modifier	OM	gingival, orange
Shoulder	SM	A, B, C, D, white, transpa
Gingival	G	1, 2, 3, 4
Base Dentin	BD	A-D
Base Dentin Modifier	BDM	salmon, caramel, ochre, ivory, lemon, vanilla, brown
Dentin	D	A-D
Dentin Modifier Chroma	DM C	A, B, C, orange
Dentin Modifier Fluo	DM F	cream, yellow, orange
Incisal	I	1, 2, 3
Incisal Opal	IO	1, 2, 3
Incisal Transpa	IT	1, 2, 3
Transpa	T	transpa
Incisal Modifier	IM	opal honey, opal white, opal blue, grey, opal grey
Chroma Concept Opaque	CC O	1 (bleach), 2, 3, 4
Chroma Concept Dentin	CC D	1 (bleach), 2 (bleach), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Chroma Concept Incisal	CC I	1 (bleach)
Touch Up Base Dentin	TU BD	light, medium, dark
Touch Up Dentin	TU D	light, medium, dark
Touch Up Incisal	TU I	medium, opal, transpa
Correction	C	transpa
Glaze	GL	transpa
Body Stains	B ST	A, B, C
Stains	ST	1 white, 2 vanilla, 3 yellow, 4 orange, 5 pink, 6 purple, 7 blue, 8 grey, 9 olive green, 10 olive yellow, 11 medium brown, 12 red brown, 13 black
Liquids		Modelling Liquid, Modelling Liquid +, Paste Liquid, Powder BOL Liquid, Shoulder Liquid, Stains Liquid, Contrast Marker
8 Shade Set 8 teintes de A à D (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D3) y compris diverses masses d'incisal et d'effets		
Chroma Concept Set 17 masses de céramiques avec des modules d'opaques, de dentine et de blanchiment		
Touch Up Set 10 masses de céramique opaque, dentine base, dentine et incisal		
Stains Universal Set 8 teintes de maquillage pour la réalisation d'effets internes et externes		

Mise à jour : 05/14

Sous réserve de modifications

ceraMotion® – Développée et fabriquée par :



www.dentaurum.de

D
DENTAURUM