


discovery[®]
smart



Klein und Brillant.

D
DENTAURUM

Auf den Schliff kommt es an!

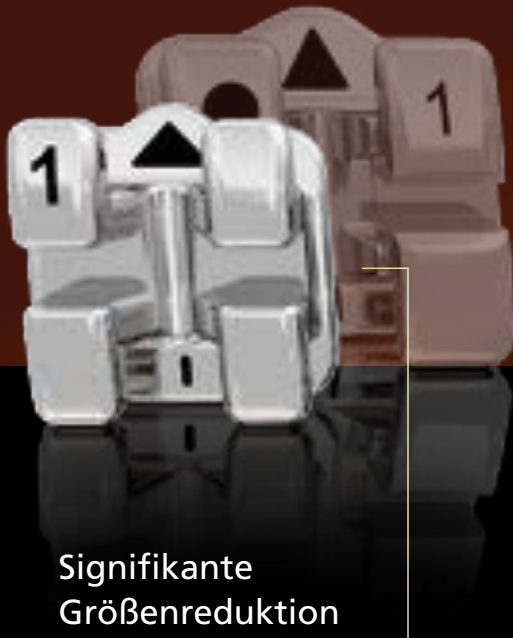

Signifikante Größenreduktion

20 % kleiner gegenüber
discovery® und eines
der kleinsten Brackets
der Welt.

discovery® steht seit mehr als 20 Jahren für perfektes Design und höchste Qualität in der Brackettherapie. Mit discovery® smart erhält die bewährte Premium-Bracketlinie ein neues Familienmitglied. Ästhetisch klein und perfekt in der Funktion.

discovery® smart besticht durch einen mesial-distal gekrümmten Slotverlauf, der dem Idealverlauf des Zahnbogens folgt. Jedes Bracket erhält damit seine individuelle Slotkrümmung. Die Friktion im Slot zwischen Behandlungsbogen und Bracket wird dadurch minimiert und sorgt für eine schnellere und präzisere Behandlung.

Das neue Familienmitglied überzeugt durch 20 % kleinere Dimensionen gegenüber discovery®.



Ausgezeichnete Gleiteigenschaft.

Neuer mesial-distal gekrümmter Slotverlauf ausgerichtet am Idealbogen.

Brillante Eigenschaften.



Ein-Stück-Bracket.

Hohe Biokompatibilität.

Optimales Flügeldesign.

Einfaches und flexibles Ligieren.

Das Bracket wird als Ein-Stück-Bracket auf modernsten Anlagen im MIM-Verfahren (Metal Injection Molding) gefertigt. Die sehr geringe Bauhöhe mit einem kleinen In-Out von 0,7 mm und die perfekt designten Flügel, verleihen diesem Bracket den perfekten Schliff.

discovery® smart vereint in sich zudem sein kleines, modernes Design mit allen brillanten Eigenschaften der discovery® Bracketfamilie. Es steht somit für höchste Sicherheit und Kontrolle und eine faszinierende Ästhetik.



Sollknickstelle.

Sicheres Debonding.

Laserstrukturierte Basis.

Patentierter laserstrukturierter Basis und FDI-Kennzeichnung für optimales Handling.



Häkchen mit Pilzkopfdesign.

Sicherer Halt der Attachments.

Laserbeschriftung.

Einfache Identifikation.

Geringe Bauhöhe.

Ausgezeichneter Tragekomfort.

3D-CAD angepasste Bracketbasis.

Perfekter Sitz auf dem Zahn.

Facettenreiche Auswahl.



Zusätzlich zu dem neuen discovery® smart haben Sie die Wahl unter weiteren Brackets aus der discovery® Familie. Sie erfüllt alle Wünsche in der Breite der Behandlungsvielfalt und bietet innerhalb der Range vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Brackets für jede Behandlung.

discovery[®]
smart

Klein und Brillant.





discovery[®]

Die Summe der Erfahrung.



discovery[®]
..pearl

Faszinierend natürlich.



discovery[®]
delight

Das Lingualsystem.



discovery[®] *sl* *discovery*[®]
sl 2.0

Hightech für Ihren Erfolg.





www.dentaurum.com

Hotline Festsitzende Technik: +49 72 31/803-550 | Hotline Herausnehmbare Technik: +49 72 31/803-555
Telefonische Auftragsannahme: +49 72 31/803-210 | Gebührenfreie Fax-Nummer: 0800/4 142434

- ➔ Informationen zu Dentaurum-Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.dentaurum.com
- ➔ Einfach und schnell bestellen im Dentaurum Online-Shop
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +49 72 31/803-470

Stand der Information: 04/17

Änderungen vorbehalten



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com