


*tiologic*<sup>®</sup>  
*easyClean*

Nettoyage très facile.

La cassette de nettoyage conçue en collaboration avec **Miele** PROFESSIONAL.

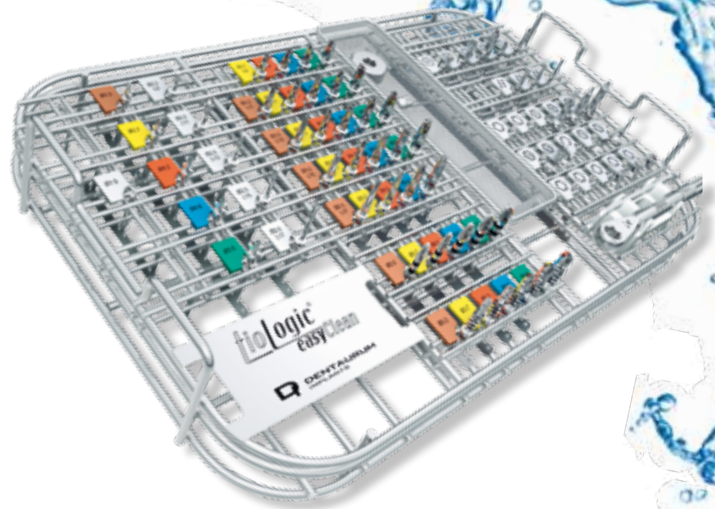


Nettoyage très facile.

tioLogic® easyClean – la cassette pour le lavage en machine.<sup>1</sup>

Conçue en  
collaboration avec:

**Miele**  
PROFESSIONAL

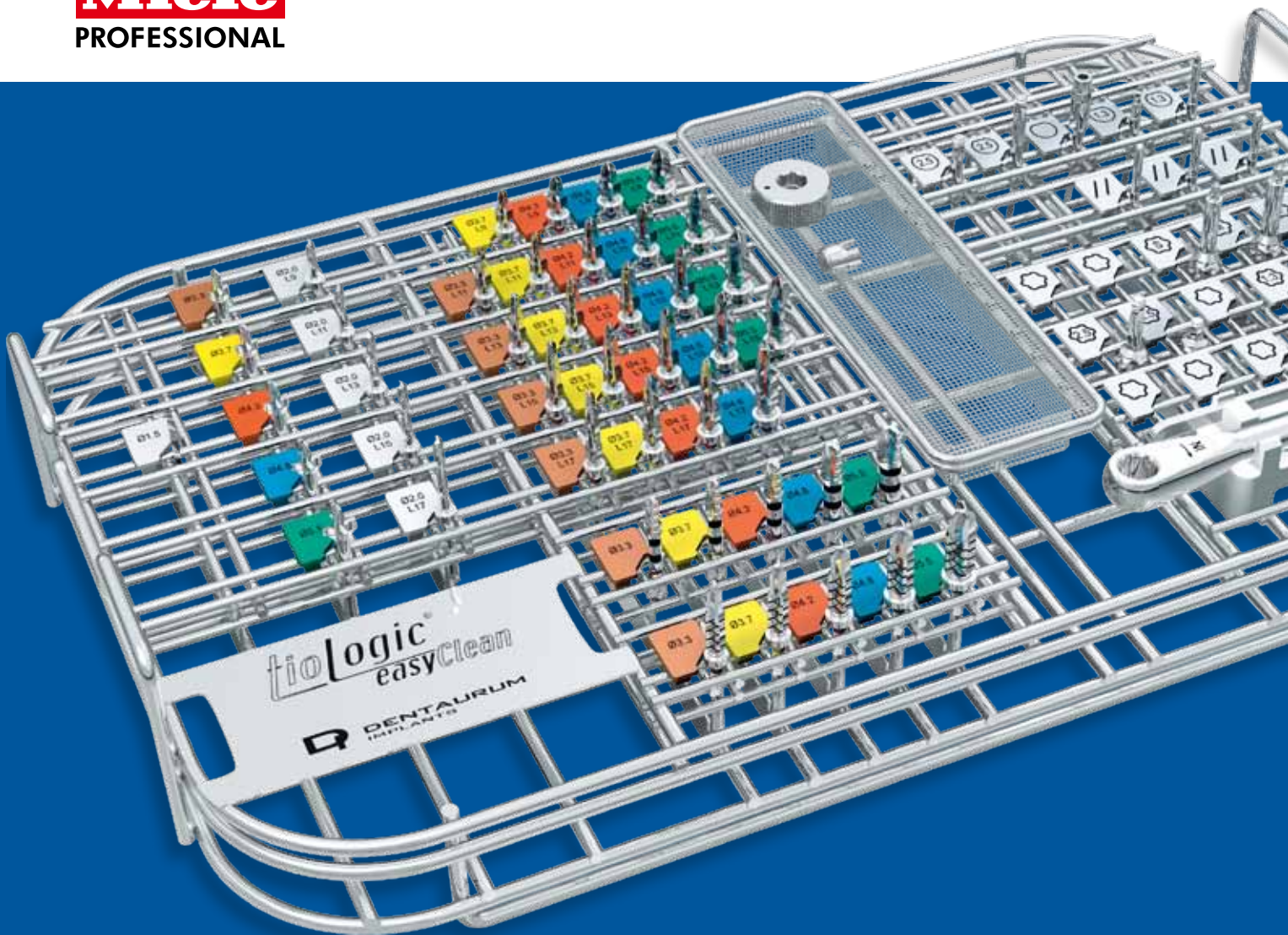

<sup>1</sup> Travaux de recherche sur la cassette de nettoyage « tioLogic® easyClean » AFIP, 2012.



**tiologic<sup>®</sup>**  
*easyClean*

Nouvelle structure réticulée.



Ressort de stabilisation.



Système de guidage clair.



Résultats du lavage en machine reproductibles.



tiologic<sup>®</sup> easyClean est une cassette de nettoyage contenant tous les instruments rotatifs nécessaires à l'implantologie ainsi que les accessoires correspondants. Les instruments sont disposés en fonction du déroulement de l'intervention. Un clip en plastique coloré marqué au laser se trouve placé à côté de chaque instrument afin de s'y retrouver plus facilement. Les instruments utilisés et accessoires peuvent être rangés directement après chaque utilisation dans l'emplacement correspondant. Cela accroît la sécurité lors de la mise en place de l'implant, tous les instruments se trouvant toujours à l'emplacement prévu. La cassette tiologic<sup>®</sup> easyClean, remplie du kit utilisé, est mise en machine après mise en place de l'implant. Les petits instruments et accessoires séparés sont également placés dans la cassette.

**Avantages:**

Lavage en machine de la cassette de chirurgie remplie du kit utilisé.

**Garantie grâce:**

- au rinçage optimal de tous les composants
- aux points de contact réduits au minimum
- à la structure innovante du treillis
- au tamis à fines mailles

**Valeur ajoutée pour le cabinet:**

- Le nettoyage à la main fastidieux devient inutile
- Reproductibilité des résultats grâce au nettoyage en machine
- Gain de temps
- Aucun tri des différents composants n'est nécessaire

**Spécialement adapté aux cabinets dentaires et à la stérilisation centralisée.**





**Cassette chirurgicale tioLogic® easyClean**

■ REF 387-418-00

Cassette complète, pour l'insertion d'implants tioLogic®.

- convient pour les diamètres d'implant:  $\varnothing$  3.3 mm/ $\varnothing$  3.7 mm/ $\varnothing$  4.2 mm/ $\varnothing$  4.8 mm/ $\varnothing$  5.5 mm
- instruments réutilisables
- boîte standard stérilisable (en aluminium), avec panier tioLogic® easyClean conçu pour le nettoyage et la désinfection en machine
- filtre hydrophobe permanent (PTFE)
- avec DVD tioLogic®
- avec Manuel de Chirurgie tioLogic®

**tioLogic® easyClean (vide)**

■ REF 387-419-00

Panier tioLogic® easyClean (vide) conçu pour le nettoyage et la désinfection en machine.



**Informations spécifiques**

Téléphone +49 72 31/803-560  
[www.dentaurum-implants.de](http://www.dentaurum-implants.de)