


Tray osteotomi

Per ottimizzare l'inserzione
implantare

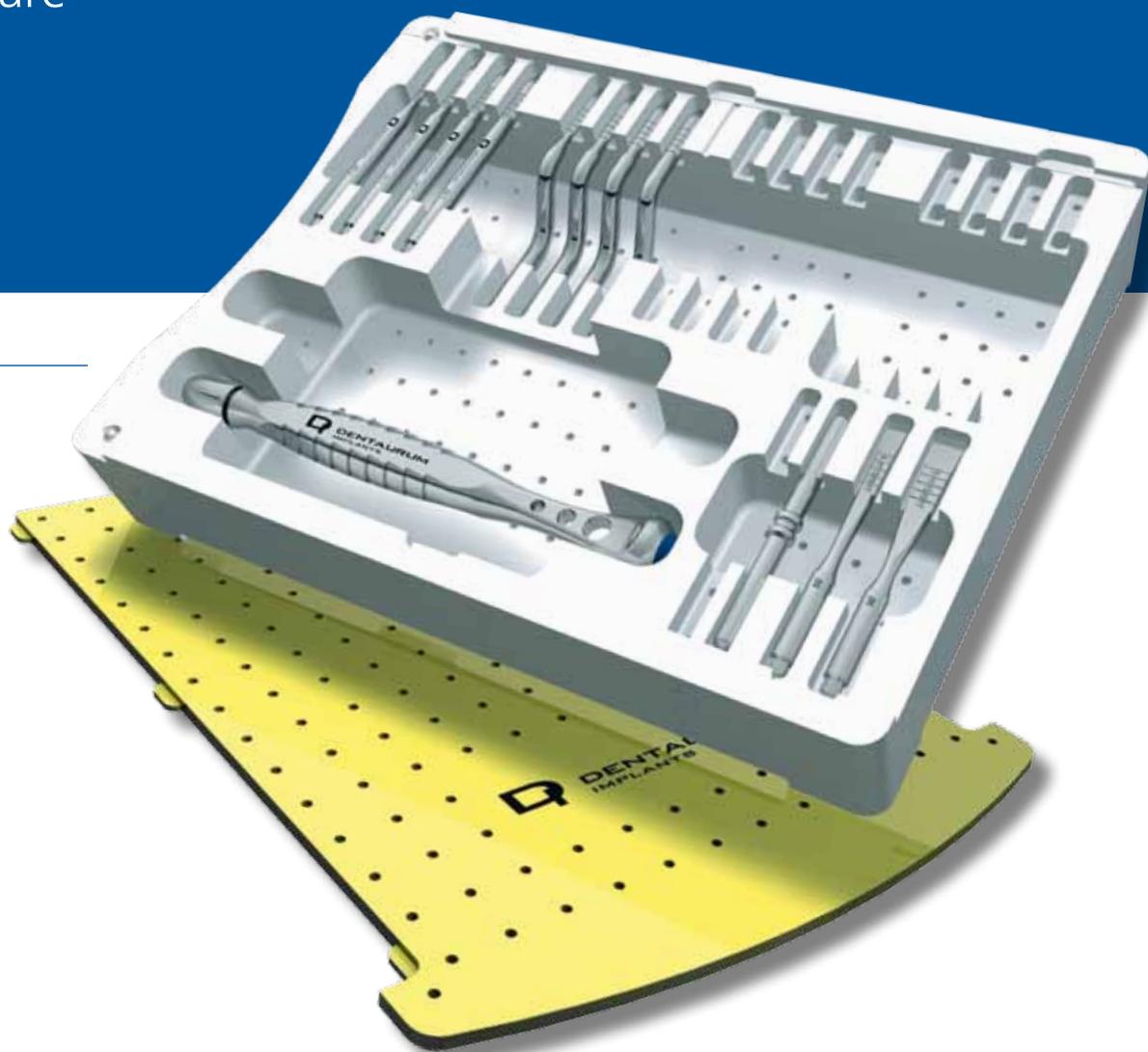

- Ampio spettro d'utilizzo
- Manico anatomico per punte intercambiabili
- Tray di alta qualità per la massima protezione e una perfetta visione

Tray osteotomi

Gli osteotomi sono strumenti concepiti per ottimizzare l'inserzione implantare. Sia gli osteotomi che gli scalpelli contenuti nel tray, sono stati creati appositamente per il sistema implantare tioLogic® e, oltre alle loro tradizionali funzioni, possono essere impiegati anche per altre tre indicazioni: la condensazione ossea, l'augmentazione parziale della base del seno mascellare e l'osteoespansione orizzontale. Gli osteotomi sono disponibili sia in forma diritta che angolata in vario spessore, mentre i sottili scalpelli per l'allargamento osseo presentano differenti dimensioni. Tutti gli osteotomi e gli strumenti sono provvisti di marcature di profondità specifiche per il sistema tioLogic® e possono essere facilmente e rapidamente intercambiati nel manico anatomico universale.

- Scalpelli sottili** ■ Concepiti per l'allargamento della cresta alveolare, evitano la frattura della parete vestibolare e palatale, disponibili con larghezza 4.0 e 6.0 mm.
 - Osteotomi angolati** ■ Ideali per l'accesso nelle zone laterali del cavo orale.
 - Diametri coordinati degli osteotomi** ■ Per la graduale e curata preparazione e osteocondensazione della cavità implantare, per sistema tioLogic®, con diametro progressivo da 2.4 / 3.1 / 3.7 / 4.2 mm.
 - Marcatori di profondità** ■ Per l'ottimale controllo della profondità, per sistema tioLogic®, con marcature a 9.0 / 11.0 / 13.0 / 15.0 / 17.0 mm.
 - Manico anatomico universale** ■ Impugnatura ideale, offre una grande sensazione di sicurezza, riduce il numero di componenti e permette una semplice sostituzione dell'inserito.
 - Tray speciale di alta qualità** ■ Realizzato in materiale di pregio, offre la massima protezione agli strumenti contenuti, la loro chiara disposizione ed è sterilizzabile.
 - Indicazioni** ■ Osteocondensazione laterale di osso spongioso, osteoespansione in caso di deficit osseo orizzontale, sollevamento della membrana del seno mascellare, accurata preparazione della cavità implantare, rialzo parziale del seno mascellare in caso di deficit osseo verticale.
-
- Tray osteotomi REF 350-102-00** ■ Kit completo di osteotomi e scalpelli per l'ottimale inserzione degli impianti tioLogic®. Tutti gli osteotomi (convessi e concavi) e gli scalpelli possono essere anche ordinati singolarmente.