


Brackets estéticos.

Para una sonrisa aun más bonita.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com

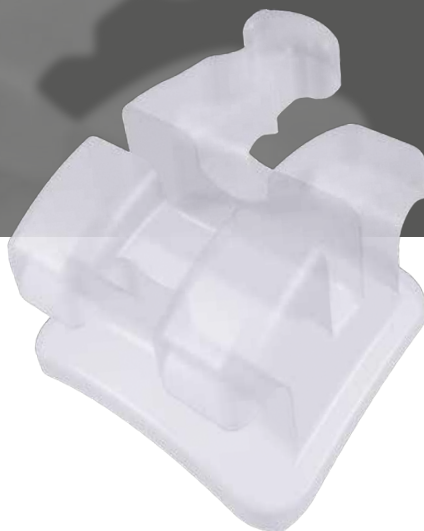



Conozca la estética en su nueva forma.

Calidad del más alto nivel.

En la planta de Ispringen son fabricados con la más moderna maquinaria y sistemas actuales de producción todos los brackets de la gran variedad de brackets de Dentaurum, ya se trate de brackets metálicos o cerámicos. Con el paso de los años, se han optimizado y perfeccionado estos métodos, armonizándolos entre sí. Lo que cuenta es la alta precisión para un empleo seguro y fiable en la terapia de ortodoncia. Con innovadoras tecnologías de producción como el sistema CIM (moldeo por inyección de cerámica), se pueden fabricar los más diversos productos de cerámica, inyectándolos. Dentaurum pretende seguir perfeccionando los materiales estéticos a fin de reaccionar de manera óptima al constante aumento de la demanda en el sector de brackets cerámicos.



discovery® pearl

Fascinantemente natural.



Sistema FDI

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	



Fascinantemente natural.



Máxima calidad y rendimiento sin compromisos.

discovery® pearl sobrepasa todos los límites conocidos de estética, calidad y rendimiento. Cementado sobre el diente, discovery® pearl se adapta perfectamente al entorno natural en boca gracias a su color y su alta traslucidez.

El bracket está compuesto solo de cerámica, sin molestos insertos de metal en el slot. Se ha construido en una sola pieza con los más modernos equipos de producción, según la técnica CIM (moldeo por inyección de cerámica).

La base del bracket se ha adaptado perfectamente a la forma del diente por medio de CAD (diseño asistido por ordenador), gracias a lo que el bracket puede posicionarse con facilidad sobre el diente. Un sistema claro de guías de colocación de diferentes colores y marcas FDI sobre las bases facilita asignar los brackets a los dientes correspondientes. Asimismo, dichas guías le ayudan a adaptar y colocar los brackets de la forma más sencilla.

Con la innovadora base esculpida por láser, se consigue no solo una buena adherencia sino un descementado seguro. Además discovery® pearl garantiza óptimos resultados terapéuticos, satisfaciendo completamente los requisitos cada vez más rigurosos de la corrección estética dental.



Características fiables:

Geometría acreditada de la gama de brackets discovery®

facilitando la combinación entre los brackets metálicos y cerámicos de discovery® de manera sencilla.

Adaptación cromática perfecta

al entorno natural en boca, como si no estuviese el bracket.

Guías de colocación de diferentes colores

que facilitan el posicionamiento sobre el diente.

Tamaño óptimo

pequeño en su diseño y grande en su fuerza, a fin de lograr óptimos resultados terapéuticos.

Base anatómica

para obtener una perfecta adaptación sobre el diente.

Base esculpida por láser con identificación FDI

con las mejores propiedades de cementado y descementado.

Ahora también disponible sin guías de colocación en el surtido de 1 caso.



Brackets cerámicos discovery® pearl / Surtidos



Roth 18/22

Gancho en los 3

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-701-03	722-701-03	718-701-73	722-701-73	6 piezas (1 bracket por diente)
15-11 / 21-25	718-701-05	722-701-05	718-701-75	722-701-75	10 piezas (1 bracket por diente)

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-701-63	722-701-63	718-701-83	722-701-83	12 piezas (1 bracket por diente)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-701-65	722-701-65	718-701-85	722-701-85	20 piezas (1 bracket por diente)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Roth 18/22

Gancho en los 3, 4 y 5

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-741-60	722-741-60	718-741-80	722-741-80	10 piezas (1 bracket por diente)

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-741-65	722-741-65	718-741-85	722-741-85	20 piezas (1 bracket por diente)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Brackets cerámicos discovery® pearl / Surtidos

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Gancho en los 3

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-702-03	722-702-03	718-702-73	722-702-73	6 piezas (1 bracket por diente)
15-11 / 21-25	718-702-05	722-702-05	718-702-75	722-702-75	10 piezas (1 bracket por diente)

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-702-63	722-702-63	718-702-83	722-702-83	12 piezas (1 bracket por diente)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-702-65	722-702-65	718-702-85	722-702-85	20 piezas (1 bracket por diente)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Gancho en los 3, 4 y 5

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-742-60	722-742-60	718-742-80	722-742-80	10 piezas (1 bracket por diente)

Diente	con guías de colocación		sin guías de colocación		Cantidad
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-742-65	722-742-65	718-742-85	722-742-85	20 piezas (1 bracket por diente)

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Brackets cerámicos discovery® pearl / Cajas individuales



Roth 18/22

con guías de colocación

Diente	Torque	Angulación	In/Out	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Cantidad
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-11	722-701-11	1 pieza
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-21	722-701-21	1 pieza
12	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-12	722-701-12	1 pieza
22	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-22	722-701-22	1 pieza
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-13	722-741-13	1 pieza
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-23	722-741-23	1 pieza
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-14	722-701-14	1 pieza
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-24	722-701-24	1 pieza
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-14	722-741-14	1 pieza
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-24	722-741-24	1 pieza
15	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-15	722-701-15	1 pieza
25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-25	722-701-25	1 pieza
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-15	722-741-15	1 pieza
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-25	722-741-25	1 pieza



Diente	Torque	Angulación	In/Out	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Cantidad
41	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-41	722-701-41	1 pieza
31	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-31	722-701-31	1 pieza
42	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-42	722-701-42	1 pieza
32	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-701-32	722-701-32	1 pieza
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-43	722-741-43	1 pieza
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-33	722-741-33	1 pieza
44	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-44	722-701-44	1 pieza
34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-34	722-701-34	1 pieza
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-44	722-741-44	1 pieza
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-34	722-741-34	1 pieza
45	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-45	722-701-45	1 pieza
35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-701-35	722-701-35	1 pieza
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-45	722-741-45	1 pieza
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-741-35	722-741-35	1 pieza

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Brackets cerámicos discovery® pearl / Cajas individuales

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

con guías de colocación



Diente	Torque	Angulación	In/Out	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Cantidad
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-11	722-702-11	1 pieza
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-21	722-702-21	1 pieza
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-12	722-702-12	1 pieza
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-22	722-702-22	1 pieza
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-13	722-742-13	1 pieza
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-23	722-742-23	1 pieza
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-14	722-702-14	1 pieza
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-24	722-702-24	1 pieza
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-14	722-742-14	1 pieza
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-24	722-742-24	1 pieza
15	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-15	722-702-15	1 pieza
25	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	718-702-25	722-702-25	1 pieza
15	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-15	722-742-15	1 pieza
25	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	718-742-25	722-742-25	1 pieza



Diente	Torque	Angulación	In/Out	Gancho	Anchura	REF (18)	REF (22)	Cantidad
41	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-41	722-702-41	1 pieza
31	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-31	722-702-31	1 pieza
42	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-42	722-702-42	1 pieza
32	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	718-702-32	722-702-32	1 pieza
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-43	722-742-43	1 pieza
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-33	722-742-33	1 pieza
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-44	722-702-44	1 pieza
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-34	722-702-34	1 pieza
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-44	722-742-44	1 pieza
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-34	722-742-34	1 pieza
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-45	722-702-45	1 pieza
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	718-702-35	722-702-35	1 pieza
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-45	722-742-45	1 pieza
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-742-35	722-742-35	1 pieza

Slot 18: 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets estéticos

Surtidos combinados discovery® pearl & smart



Roth 22

Gancho en los 3 · con guías de colocación

Brackets	Diente	REF (22)	Cantidad
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-404-00	20 piezas
discovery® smart	45-41 / 31-35		(1 bracket por diente)

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gancho en los 3 · con guías de colocación

Brackets	Diente	REF (22)	Cantidad
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-400-00	20 piezas
discovery® smart	45-41 / 31-35		(1 bracket por diente)

Slot 22: 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets cerámicos discovery® pearl / Accesorios

Instrumento para descementar discovery® pearl

esterilizable

Para el descementado sencillo y seguro de brackets cerámicos discovery® pearl.

REF 019-001-00

1 pieza




Dentalastics® pearl

Gomas elásticas para ligaduras

Especialmente elásticos y delgados, para la fijación de los arcos en los brackets, reemplazando las ligaduras de alambre.

Contenido: 50 malletes x 20 anillos = 1.000 piezas

Color	ø anillo interior	REF	Cantidad
pearl	1,3 mm	774-563-01	1 envase

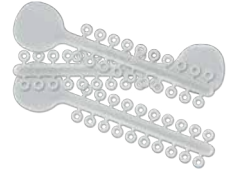

Cadena elástica SUPER Elasto-Force

Fuerza de tracción constante durante un período prolongado. Alta elasticidad con excelente recuperación elástica.

Color	ø anillo interior	Longitud	REF	Cantidad
pearl	1,3 mm	4,6 m	774-236-01	1 rollo



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Lleva montados:

- brackets cerámicos discovery® pearl
- arco translúcido pearl
- anillos elastoméricos para ligaduras Dentalastics® pearl

Maxilar de plástico.

REF 892-000-18

1 pieza

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® pearl

Roth 22

Lleva montados:

- brackets cerámicos discovery® pearl, maxilar / mandíbula 5-5
- tubos bucales Ortho-Cast M-Series, maxilar / mandíbula 6
- arco translúcido pearl, maxilar
- arco Tensic®, mandíbula

• anillos elastoméricos para ligaduras Dentalastics® pearl

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.

REF 892-000-21

1 pieza

