


ceraMotion® Z

The symbol for smarter zirconia

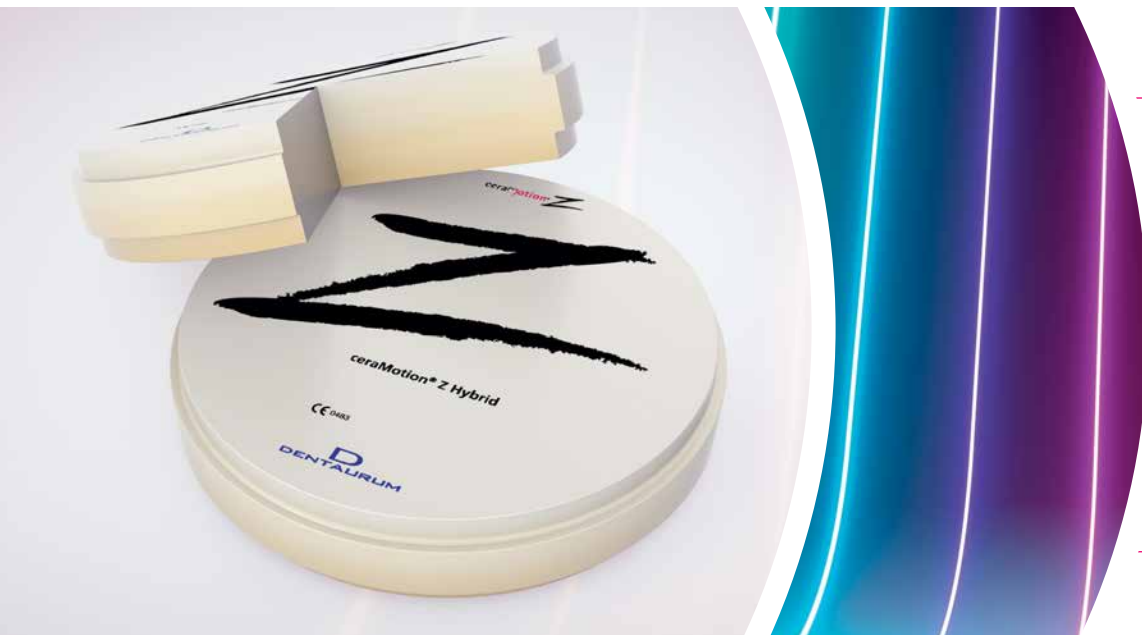

ceraMotion® Z Hybrid – informations sur l'imbrication


Avec ceraMotion® Z Hybrid, vous pouvez obtenir des résultats fiables et reproductibles en matière de teinte et de caractéristiques mécaniques.

La zircone polychrome et multicouches ceraMotion® Z Hybrid est un véritable matériau polyvalent. Ce disque allie l'esthétique d'une zircone cubique et la résistance d'une zircone hautement translucide.


ceraMotion® Z Hybrid, c'est de l'esthétique pure, un produit qui se prête à tous les travaux dans les régions antérieure et postérieure. Grâce à un procédé de haute technologie spécial, deux matériaux en zircone distincts sont réunis dans un disque. ceraMotion® Z Hybrid est disponible dans les 8 teintes V les plus usuelles et deux teintes bleach et assure une reproduction sûre des teintes.

Avantages du produit :

- Reproductibilité sûre pour une esthétique de haut niveau
- Se prête à de nombreuses indications du fait de sa résistance extrême en zone dentinaire
- Transitions chromatiques fluides et naturelles de la zone cervicale à la zone incisale
- Grande résistance à la déformation pour les bridges de grande portée
- Disponible dans les 8 teintes V les plus usuelles et deux teintes bleach
- Excellente fraisabilité
- Température de frittage recommandée 1480 °C
- Translucidité 44 % - 47 % (non coloré, 1,0 mm)
- Finition économique avec ceraMotion® One Touch
- Incrustation cosmétique sûre avec ceraMotion® Zr

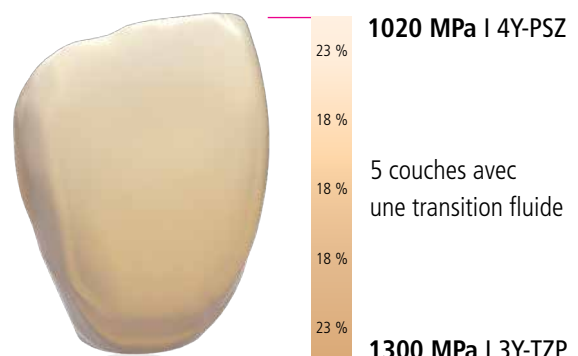

D
DENTALURUM

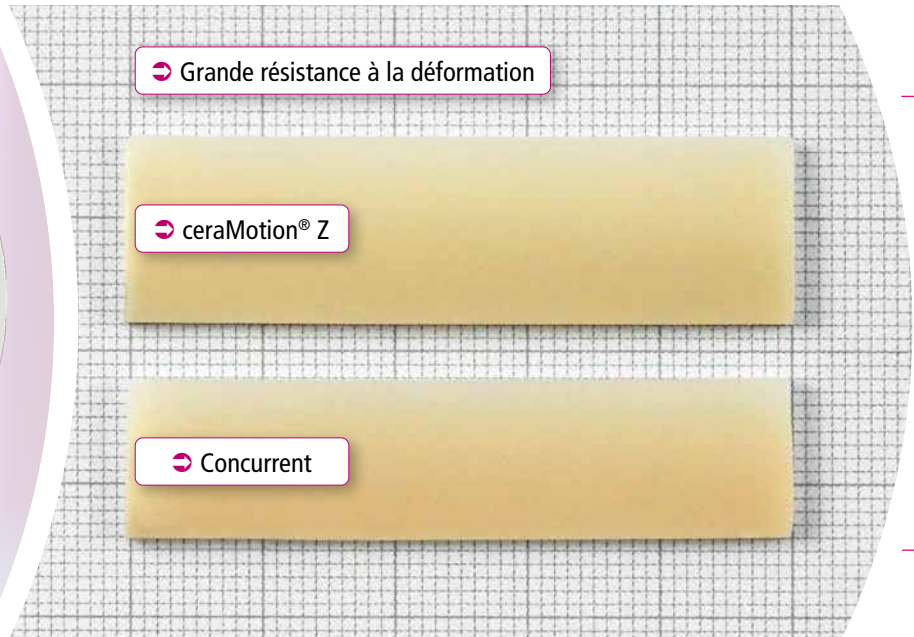

Choisir la bonne hauteur de disque !

La hauteur du disque doit être la plus proche possible de la couronne agrandie, élaborée en CAO.

Comment choisir la bonne hauteur de disque ?

Couronne élaborée en CAO jusqu'à 10 mm → hauteur de disque 14 mm

Couronne élaborée en CAO jusqu'à 13,4 mm → hauteur de disque 18 mm

Couronne élaborée en CAO jusqu'à 16 mm → hauteur de disque 22 mm

Aperçu

Teinte	REF (14 mm)	REF (18 mm)	REF (22 mm)	Quantité
A1	272-411-14	272-411-18	272-411-22	1 pièce
A2	272-412-14	272-412-18	272-412-22	1 pièce
A3	272-413-14	272-413-18	272-413-22	1 pièce
A3,5	272-415-14	272-415-18	272-415-22	1 pièce
A4	272-414-14	272-414-18	272-414-22	1 pièce
B1	272-421-14	272-421-18	272-421-22	1 pièce
B2	272-422-14	272-422-18	272-422-22	1 pièce
C2	272-432-14	272-432-18	272-432-22	1 pièce
Bleach 1	272-300-14	272-300-18	272-300-22	1 pièce
Bleach 2	272-400-14	272-400-18	272-400-22	1 pièce



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.