

IT'S EASY
#CLICK&GO
SO FAST &
RELIABLE

discovery[®]
SMART sl



D
DENTAURUM
1886

GENTLE,
STABLE AND
EFFICIENT
#CLICKWORK



30
years
discovery®

discovery®
SMART sl

El **discovery® smart sl** es una innovadora incorporación a la exitosa línea de brackets Premium de discovery®; pasivo autoligante y smart de uso. El bracket llama la atención por su material de alta calidad y también por su eficaz sistema de apertura/cierre.

#CLICK & GO – deslizando por incisal/oclusal la tapa se cierra fácil e intuitivamente.

“CLICK” – la tapa encaja de forma perceptible.

„GO” – el cambio del arco es mucho más rápido, por lo cual menos tiempo en la silla.

El pasivo Low friction Bracket discovery® smart sl permite movimientos suaves del diente que mejoran la comodidad del paciente. Una fricción más baja y el uso de fuerzas controladas hace que los dientes se muevan con eficiencia y suavidad.



¡Descubra más online!


El **discovery[®] smart sl** se elabora en la sede de Dentaureum en Ispringen, en instalaciones ultramodernas y complejas mediante el proceso de moldeo por inyección de metal MIM (Metal Injection Molding) – Made in Germany. Los puntos fuertes manifestados en el exitoso **discovery[®] smart**, tales como su base estructurada con láser, su perfil muy bajo, un in/out de tan solo 0,7 mm y el diseño optimizado de sus aletas han sido preservados.

El nuevo fichaje, **discovery[®] smart sl** dispone de una alta seguridad, control preciso de la rotación y un claro diseño estético de superficie lisa y cantos redondeados. La apertura de la tapa es fácil mediante un movimiento giratorio intuitivo con el instrumento de apertura.

#CLICK & GO

#CLICK & GO – deslizándolo por incisal/oclusal la tapa se cierra fácil e intuitivamente.

“CLICK” – la tapa encaja de forma perceptible y segura.

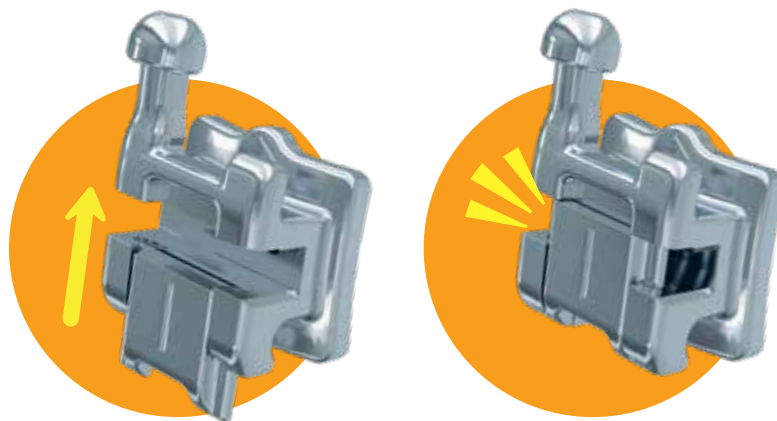

IN
WI
ASE
FD

ANATOMICAL BASE
WITH PATENTED
ER SURE
DI TECHNIQUE
#CLICK&GO



ALL FEATURES
MANY BENEFIT
SMILE, BRACI
#CLICK&GO



Perfil bajo

Bracket muy cómodo sobre
el diente

Bracket de tres piezas

Alta biocompatibilidad
al prescindir de la soldadura

**ganchos con diseño de
cabeza de hongo**
Retención segura de los ataches

**Muy buena precisión
de ajuste**
Deslizamiento fluido de la tapa


Marcación media
Permite una fácil orientación

**Ventana con cantos
redondeados**
Para la colocación guiada y segura del
instrumento de apertura

**Base del bracket
3D-CAD con forma
anatómica**
Adaptación perfecta sobre el diente

**Base esculpida por láser
patentada**
Con marcación FDI para una
sencilla manipulación

**Área inferior del ala
más grande**
Para un ligado más rápido y flexible

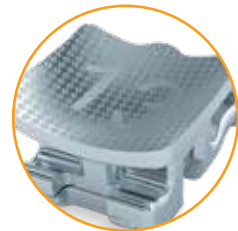

Instrumento especialmente diseñado

La apertura de la tapa es fácil mediante un movimiento giratorio intuitivo con el instrumento de apertura.



Apertura fácil



bracket cerrado



colocación del instrumento



bracket abierto

Funcionalidad & comodidad


Mecanismo de fácil apertura y cierre que permite el cambio rápido del arco reduciendo así notablemente el tiempo de silla - simplemente **#CLICK & GO**.

Los amplios socavados en las aletas facilitan el ligado, mientras que el perfil plano, dimensiones perfectas y superficie redondeada garantizan una gran comodidad para el paciente.

Eficiencia & control

Gracias a un slot curvado individualmente y una tapa de cierre pasiva se minimiza la fricción sobre el bracket. El slot estable cercano del diente mejora el control de la rotación y garantiza un movimiento suave y guiado del diente.

EASY TO USE FUNCTIONAL & EFFICIENT NO SMART

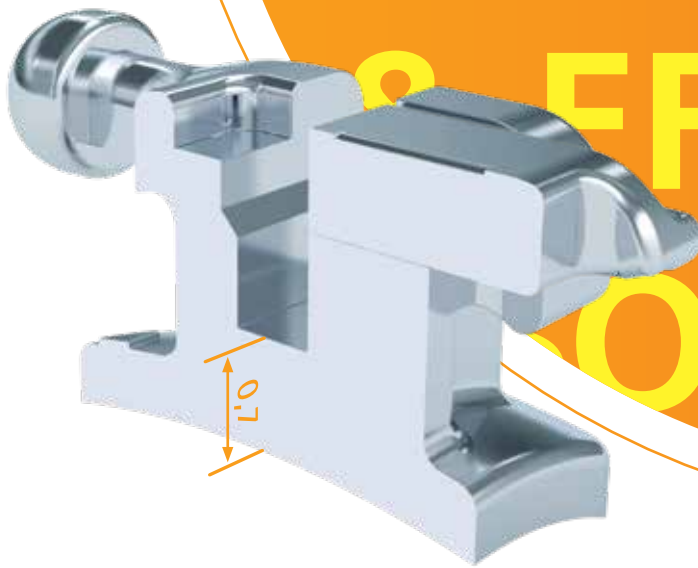

Terapia & manejo

Los amplios socavados de las aletas permiten la utilización de todo tipo de ligaduras. El bajo valor de in/out es compatible con todos los brackets discovery® – sin necesidad de doblez de compensación. La base del bracket está estructurada con láser y marcación FDI patentada, además anatómicamente adaptada en 3D-CAD lo que garantiza la colocación fácil y sencilla.

Calidad & biocompatibilidad

El preciso proceso MIM con polvo metálico de grano fino garantizan un alto grado de precisión de ajuste, superficies lisas y estabilidad. – sin soldaduras para una gran biocompatibilidad.

La combinación ideal



ORTHOCAST SL

Uso inteligente, gran función

Para un tratamiento sencillo y confortable hemos creado el tubo bucal autoligable Ortho-Cast sl. Enfoque: colocación del arco en los molares de manera rápida y sencilla. Elaborado con el preciso proceso MIM y basado en la acreditada línea Ortho-Cast, posee todas las ventajas del discovery® smart sl – su eficiencia, comodidad y rendimiento seguro.




ORTHOCAST M-SERIES MINI

A medida & bien pensado

Los tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini – creados especialmente para la técnica de cementado – son convincentes por su diseño delicado. Son ideales para los molares en erupción.

Más accesorios
tales como arcos los
encontrará aquí:

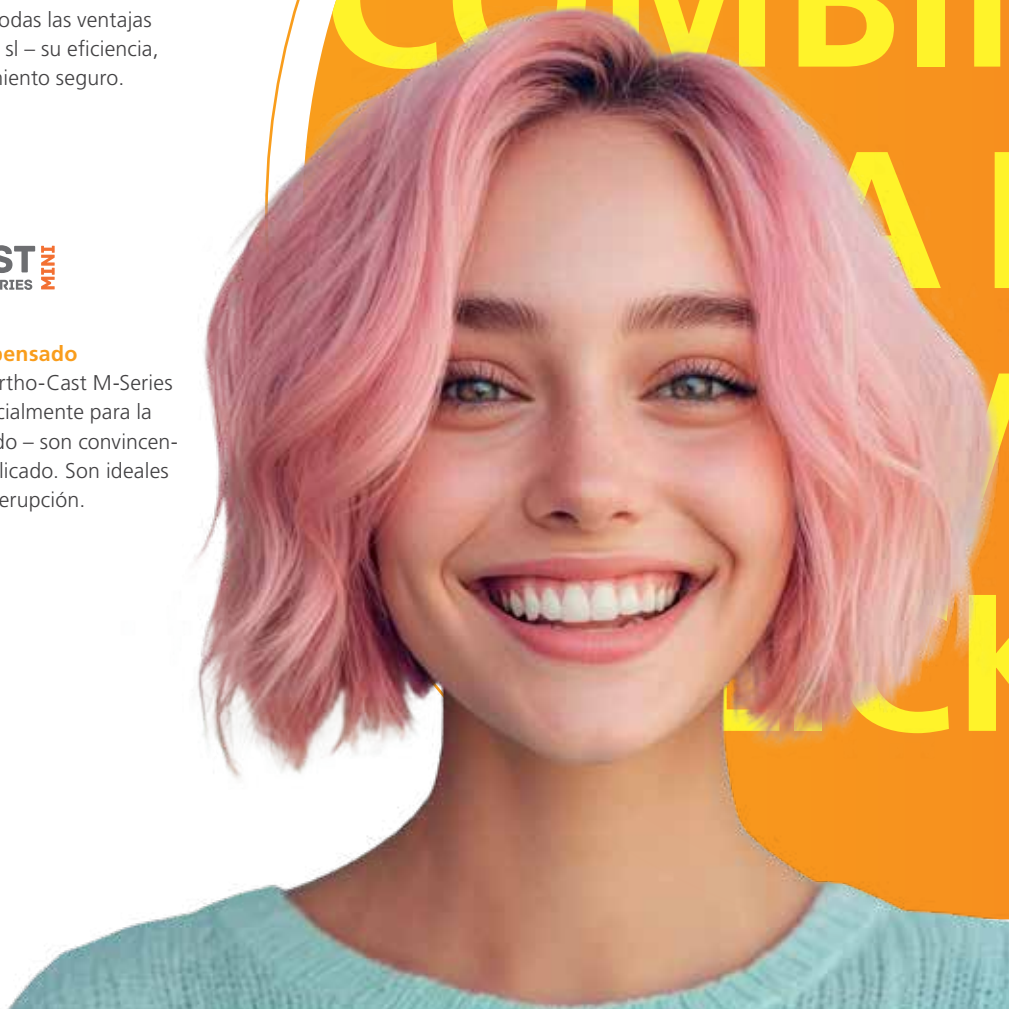

YOUR
NATION
PERFECT
MATCH!
& GO




discovery[®]
SMART SL



discovery[®]
SMART



discovery[®]

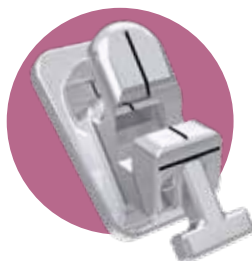

discovery[®]
DELIGHT



discovery[®]
PEARL



CONTACTO
DENTAURUM

Atención al cliente	+49 72 31/803 -extensión
Ortodoncia	-550
Customer Support Digital	-280
Recepción de pedidos	-210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



TIENDA ONLINE
SHOP.DENTAURUM.COM