



**3D-SCHIENE.
PRÄZISE GEPLANT.
STABIL VERSORGT.**



D
DENTAURUM
1886



prime4me[®]
PERIO[®]

DIE **3D-SCHIENE** SO „
INDIVIDUELL WIE JEDER PATIENT



Der **prime4me® PERIO^{3R}** ist die maßgeschneiderte Lösung zur Schienung parodontal gelockerter Zähne

Die Schiene lässt sich durch die **digitale Planung** exakt an die individuelle Zahnsituation anpassen – auch bei schwierigen Verhältnissen.

Gefertigt aus hochwertigem **Titan Grade 5**, bietet unsere 3D-Schiene nicht nur eine hohe Biokompatibilität, sondern ist auch ideal für Patienten, die nickelfreie Materialien bevorzugen.

Die präzise Passform unterstützt eine **gute Hygienefähigkeit**, vor allem im Interdentalraum, und bietet hohen Tragekomfort – für zufriedene Patienten und eine zuverlässige Schienung bei gelockerten Zähnen.

Die patientenindividuelle CAD/CAM-Planung ermöglicht eine funktionell **stabile Versorgung unter Berücksichtigung ästhetischer Herausforderungen**, insbesondere bei schwarzen Dreiecken im sichtbaren Bereich.



Mehr
Informationen


DIE 3. DIMENSION MACHT DEN UNTERSCHIED

VOLLFLÄCHIGE, LINGUALE ANPASSUNG

Maximale Stabilität, da die
PA-Schiene vollständig und
gleichmäßig aufliegt

FLACHES, HALBRUNDES QUERSCHNITTSPROFIL

Grazile PA-Schiene,
robust und langlebig,
Stärke 0,55 mm bis 0,7 mm
möglich

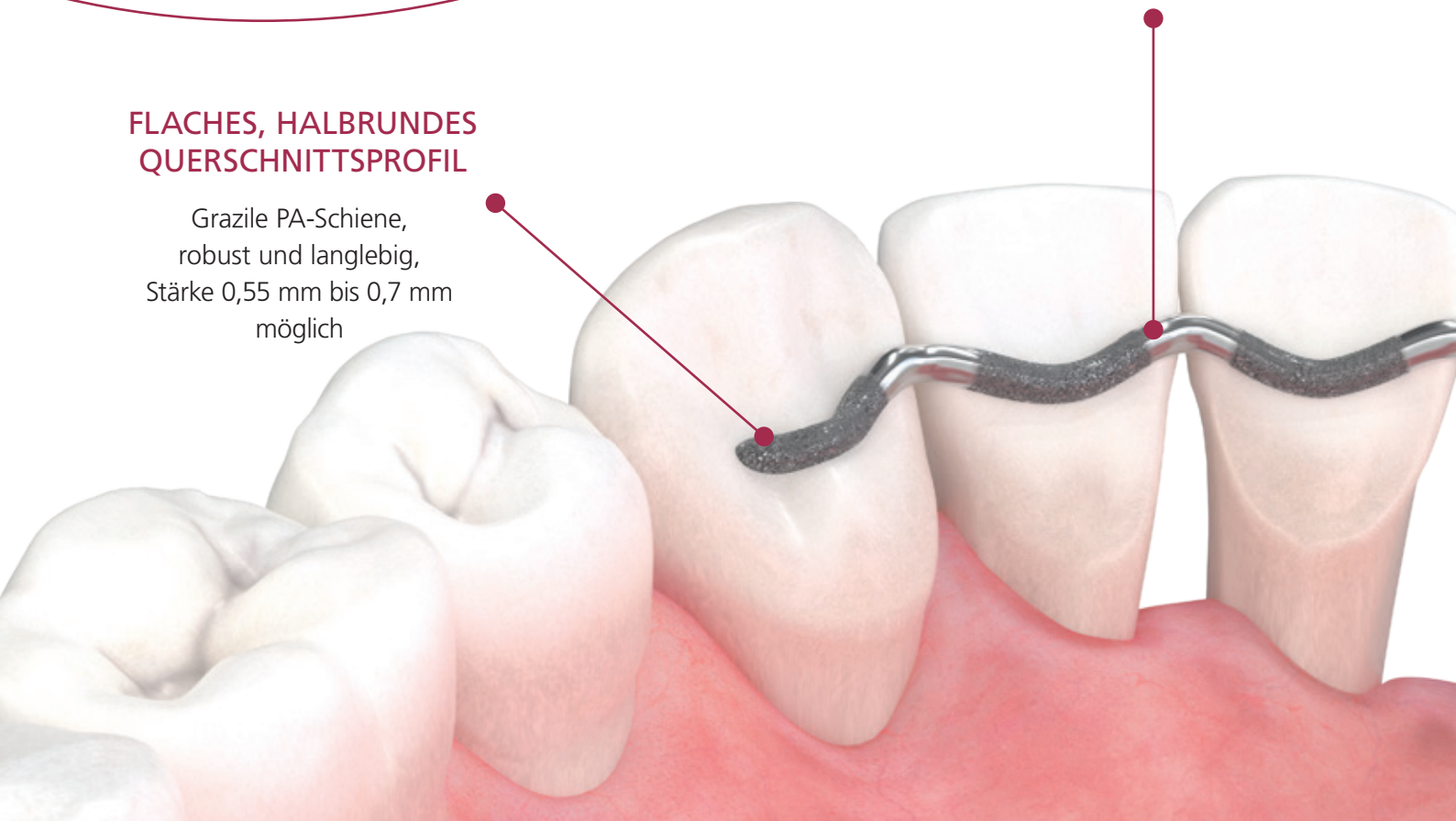


EINFACHE ANWENDUNG MIT TRANSFER TRAY

Spannungsfreies Einsetzen und
genaues Positionieren für
maximale Sicherheit und Komfort




OPTIMALE INDIVIDUELLE PASSFORM

Auch bei engen Platzverhältnissen

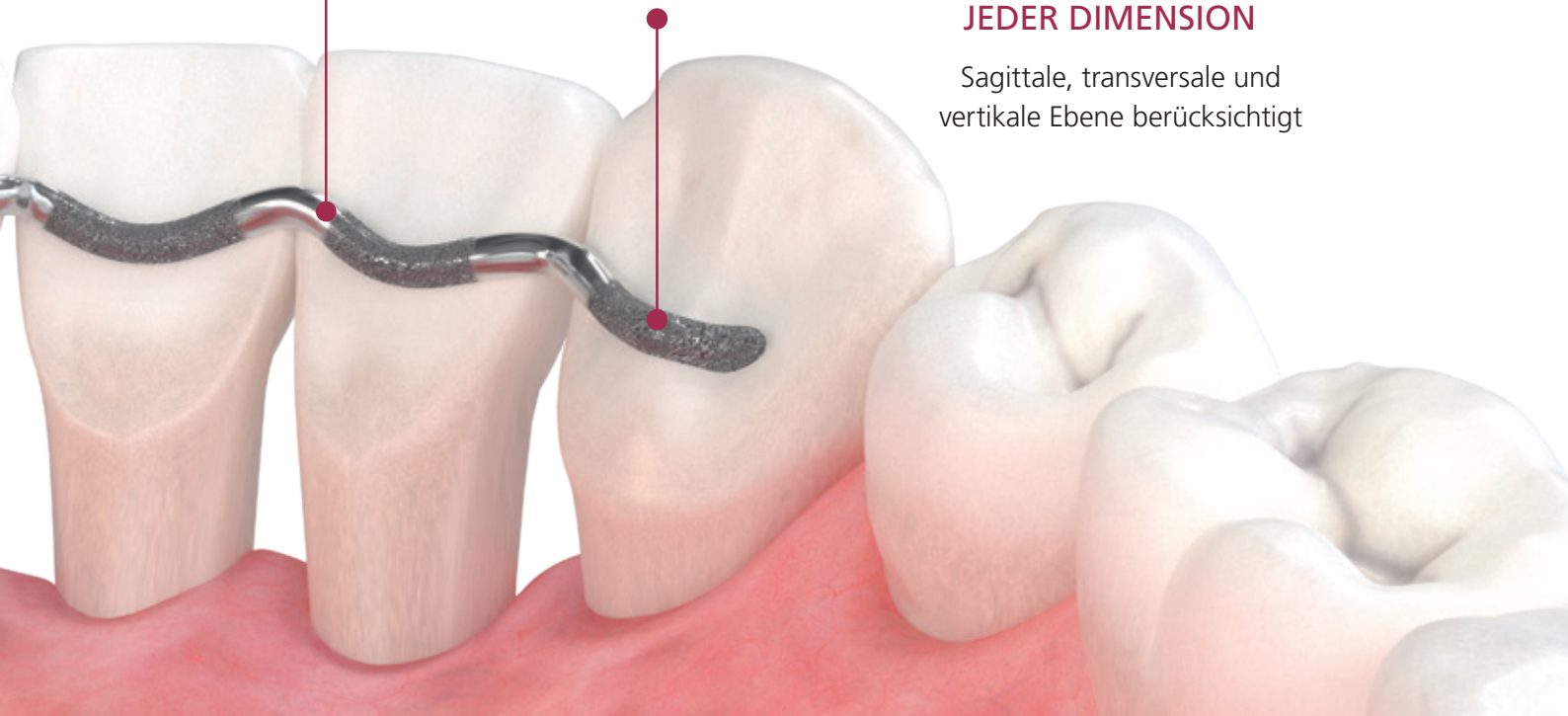

PRÄZISE • PASSGENAU • INDIVIDUELL • STABIL • LANGLEBIG

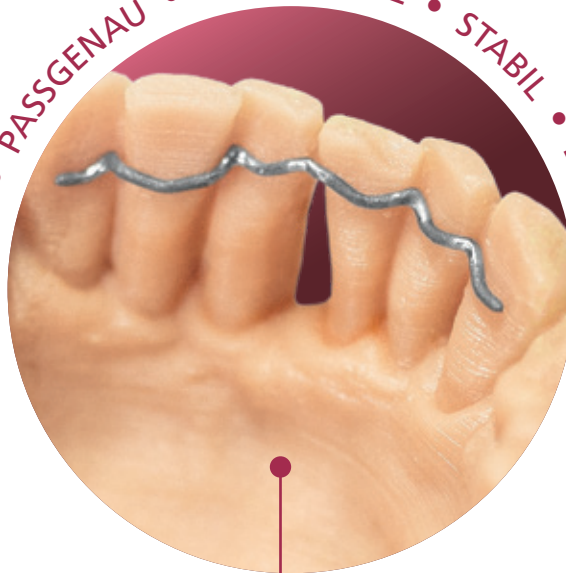

PRÄZISION IN JEDER DIMENSION

Sagittale, transversale und
vertikale Ebene berücksichtigt

Ti

Titanium

by DENTAURUM

AUS EINEM STÜCK:

Kein Verformen und
kein Biegen.



HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT:


Ideales Material
für PA-Schienen.



WIR
VERWENDEN
TITAN GRADE 5

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT:

Begünstigt eine lange Produktlebensdauer.

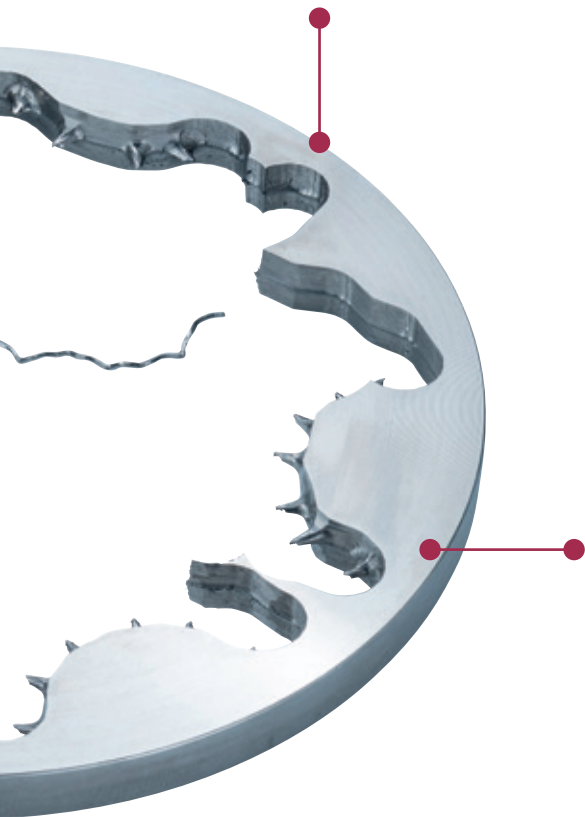

PROFITIEREN SIE VON UNSEREM KNOW-HOW


HOHE BIOKOMPATIBILITÄT:

Optimal verträglich für den menschlichen Körper, auch für Patienten, die nickelfreie Materialien bevorzugen.

DENTAURUM HIGH-TECH

Dank modernster Frästechnik ist unser **prime4me® PERIO^{3R}** passiv: Das Material wird abgetragen und weder verformt noch gebogen. Dieser Fertigungsprozess ist ideal für die Schienung parodontal gelockerter Zähne. Zur Verbesserung des Adhäsivverbunds werden die Klebestellen sandgestrahlt. **Wir bieten 24 Monate Gewährleistung.**



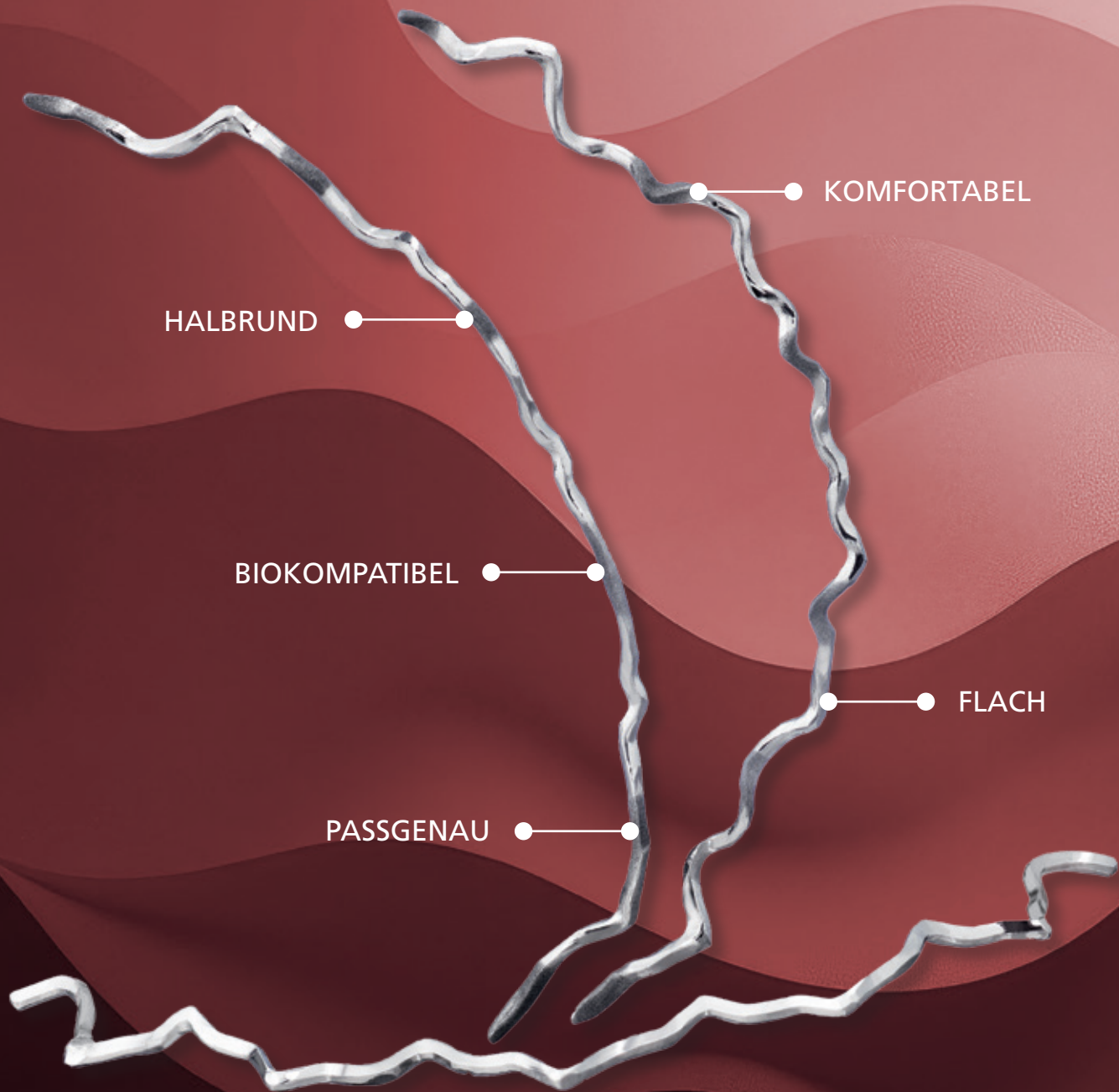

HALBRUND

BIOKOMPATIBEL

PASSGENAU

KOMFORTABEL

FLACH

VERBESSERTE MUNDHYGIENE

Das flache, halbrunde Profil erleichtert die Reinigung der Zähne und Interdentalräume. Das geringere Volumen gegenüber konventioneller Schienung sorgt für ein angenehmeres Mundgefühl.

ÄSTHETISCHE PA-VERSORGUNG

Dank der individuellen 3D-Planung und des grazilen Designs unauffällig in situ.

HOHER TRAGEKOMFORT

Angenehmer lingualer Sitz und reduzierte Klebeflächen sorgen für ein kaum spürbares Tragegefühl. PA-gelockerte Zähne werden stabilisiert. Der Kaukomfort kann wiederhergestellt werden.

SEHR GUTE VERTRÄGLICHKEIT


Gefertigt aus biokompatiblen Titan Grade 5, ist die PA-Schiene ideal auch für Patienten, die nickelfreie Materialien bevorzugen.



“

VIELE
VORTEILE
FÜR IHRE PATIENTEN

EINFACH **BESTELLEN** MIT WENIGEN KLICKS

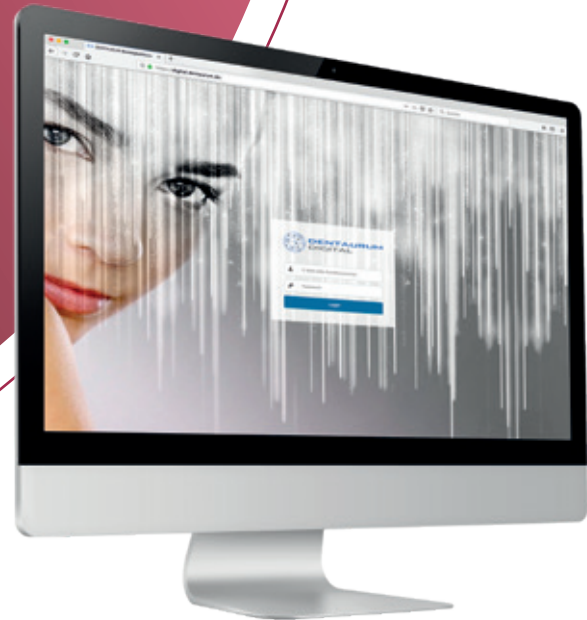

Hier können Sie
direkt bestellen über
digital.dentaurum.de



1 Bestellung mit
Intraoralscan, Modellscan
oder Gipsmodell*



2 Freigabe des
optimalen 3D-Designs

*Kostenpflichtiger Service zur Digitalisierung von Gipsmodellen nur in Deutschland und Österreich verfügbar.

NOCH FRAGEN?


Profitieren Sie von der kompetenten Beratung durch unsere CAD/CAM-Experten. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses.

Customer Support Digital:

☎ +49 72 31/803-280 🌐 digital@dentaureum.de

Sie erreichen uns (MEZ):

Montag bis Donnerstag: 8:00–17:00 Uhr · Freitag: 8:00–15:00 Uhr

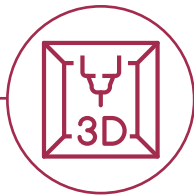

3 Herstellung des
prime4me® PERIO^{3R}



4 Qualitätsprüfung
und Reinigung



5 Übergabe
an Versand

Die Lieferzeiten sind vom Zielland abhängig.
Eine genaue Übersicht finden Sie hier:



DAUER: 5 TAGE



CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE +49 72 31 / 803 - *Durchwahl*
Customer Support Digital -280
Auftragsannahme -210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM