


rema® 

Revêtements pour la coulée sur modèle




DENTAURUM
1886

Rapides ...

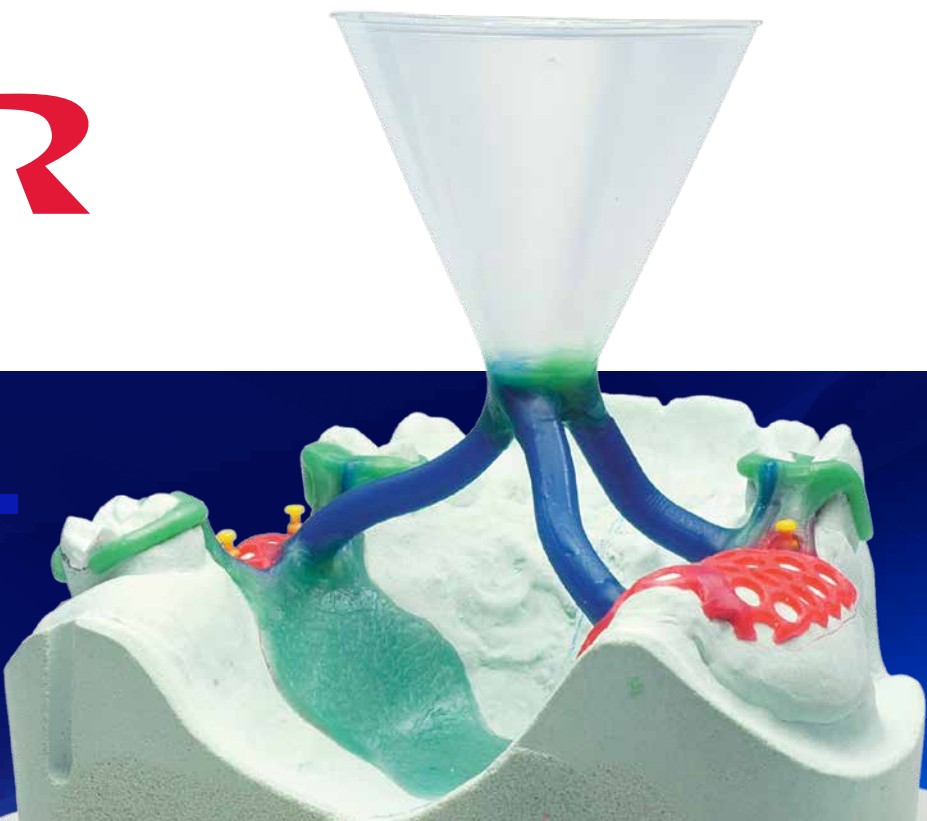

Le revêtement universel idéal.

rema[®] dynamic S se distingue par sa grande flexibilité et sa facilité d'utilisation. La grande stabilité des bords, les surfaces lisses ainsi que l'expansion bien maîtrisée qu'elle procure se traduisent par une excellente précision d'ajustage, même dans le cas d'armatures compliquées.

- Flexibilité totale lors du préchauffage.
 - programmation rapide
 - préchauffage rapide réduit à partir de 600 °C
 - préchauffage conventionnel
- convient parfaitement en prothèse combinée.
 - précision d'ajustage impressionnante, même en présence d'infrastructures complexes
- convient pour tous les procédés de duplication.
 - très bon comportement aussi bien avec les silicones qu'avec les gels
- Excellente précision d'ajustage.
 - grande solidité des angles, surfaces bien lisses



rema[®]
dynamic S 

Temps de travail	3 - 4 min
Préchauffage	Préchauffage constant, préchauffage semi-rapide, préchauffage rapide
Température de préchauffage	900 - 950 °C
Résistance à la pression	12 MPa
Teinte	vert

Revêtement	
20 kg (112 x 180 g)	REF 105-600-50
20 kg (40 x 500 g)	REF 105-610-50
8 kg (16 x 500 g)	REF 105-609-50
Liquide de mélange	
1 l standard	REF 105-620-50
1 l Speed	REF 105-623-50

...flexibles et précis.

Excellents résultats dans toutes les conditions de laboratoire.

Avec rema[®] Exakt F, le département de recherche de Dentaureum a su améliorer une fois de plus le revêtement classique rema[®] Exakt. Le revêtement est devenu encore plus intéressant grâce à une nouvelle granulométrie plus fine. Il séduit par les excellentes propriétés de mise en œuvre et la précision d'ajustage remarquable. Sa formulation, déjà éprouvée des millions de fois, a encore été optimisée.

- Conçu sur la base du revêtement classique rema[®] Exakt.
 - sa formulation éprouvée a été optimisée par un grain plus fin
- Très facile et très agréable à utiliser.
 - consistance agréable
 - bonne fluidité
 - temps de travail suffisant
- Très grande précision d'ajustage.
 - les pièces coulées s'ajustent parfaitement, quel que soit le domaine
- Démoulage très facile.
 - il s'effectue tout en souplesse et un léger sablage suffit



rema[®]
Exakt F

Temps de travail	3 - 4 min
Préchauffage	Préchauffage constant, préchauffage avec temps de stabilisation
Température de préchauffage	950 - 1.000 °C
Résistance à la pression	10 - 14 MPa
Teinte	rose

Revêtement	
20 kg (50 x 400 g)	REF 105-020-50
20 kg (100 x 200 g)	REF 105-021-50
8 kg (20 x 400 g)	REF 105-008-50
Liquide de mélange	
1 l	REF 105-501-00



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM