

remanium®
star 



Un alliage.
Trois technologies de mise en œuvre.
Une qualité premium.


DENTAURUM
1886

Un alliage.



La formule gagnante remanium® star.

60.5 % Co · 28.0 % Cr · 9.0 % W · 1.5 % Si

Depuis de nombreuses décennies, les alliages de coulée remanium® non précieux fabriqués par Dentauro sont synonymes de grande qualité dans le domaine de la prothèse dentaire et ont déjà été utilisés des millions de fois. Afin de permettre aux utilisateurs de nouvelles technologies de continuer à mettre en œuvre des alliages cliniquement éprouvés, l'alliage CoCr remanium® star, de même qualité, a été mis au point pour trois technologies de mise en œuvre.

remanium®
star 

Trois technologies de mise en œuvre.

Nous garantissons la qualité premium remanium® pour toutes les trois technologies de mise en œuvre.

Coulée



- excellentes propriétés de fusion et de coulée
- identification facile du moment exact de la coulée lors de la fusion à haute fréquence
- alliage très facile à fraiser et à polir en raison de sa très faible dureté

Fraisage



- structure de coulée optimisée
- très forte résistance
- faible dureté, d'où un fraisage facile

fusion laser



- poudre très fine assurant une structure homogène
- structure dense
- constance des matériaux
- sans déformation grâce à l'utilisation d'un traitement thermique économe en temps et en ressources
- Convient aussi bien pour les couronnes et les bridges que pour les prothèses partielles

Une céramique.



En savoir plus

ceraMotion® Me – le partenaire fiable de remanium® star.

remanium® star est le n° 1 des alliages céramisables remanium®. Fort d'une expérience de plusieurs décennies dans le développement des céramiques, le groupe Dentaurem s'est associé à une équipe d'experts internationaux chevronnés pour mettre au point une nouvelle génération de céramiques cosmétiques pour alliages non précieux :

ceraMotion® Me

Avantages.

- forte adhérence grâce au procédé TRC (Tension Reducing Connection)
- aucun bonder requis
- pas de cuisson d'oxydation
- pas de refroidissement lent
- intensité élevée des couleurs même après plusieurs cuissons
- possibilités quasi-illimitées allant de la structure de base à une personnalisation hautement esthétique




Une qualité premium.

Qualité et pureté – made in Germany !

- Conception, fabrication et contrôle assurés par Dentaureum à Ispringen
- Stricte utilisation de matières premières de la plus grande pureté pour tous les alliages remanium®
- Résistance maximale à la corrosion et biocompatibilité prouvée scientifiquement
- Excellente adhérence à la céramique cosmétique (p. ex. ceraMotion® Me)
- Garantie d'une sécurité absolue et d'une mise en œuvre aisée grâce à une riche expérience de plusieurs décennies



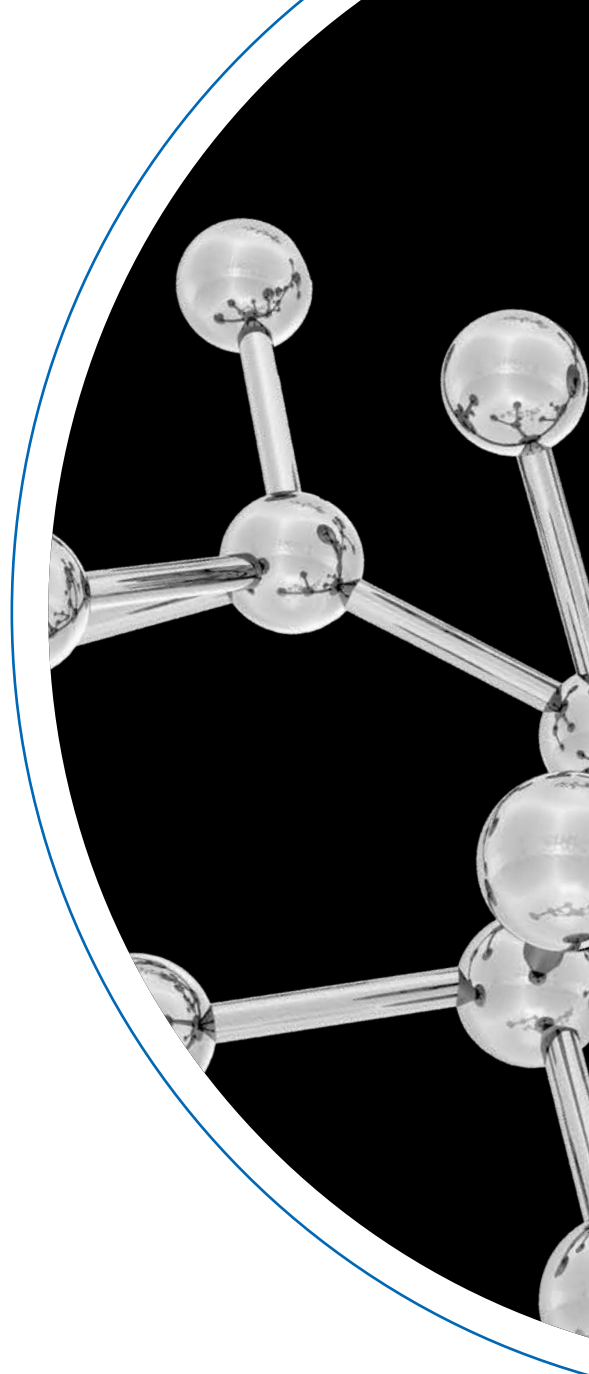

CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Allemagne



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



BOUTIQUE EN LIGNE
SHOP.DENTAURUM.COM