



PREMIUMLINE



Pinces de Dentaureum

Force. Élégance. Précision.

D
DENTAURUM
1886



PREMIUMLINE



PINCE COUPANTE DISTALE MINI & PINCE YOUNG
REF 003-702-00 & REF 012-074-00

PRÉCISION ET QUALITÉ CONVAINCANTE **PREMIUM-LINE** **PINCES**

Bienvenue dans le monde **des pinces Premium-Line de Dentaureum** – synonyme de produits de haute qualité, fabriqués avec des décennies d'expérience et une précision magistrale. Depuis sa création en 1886, Dentaureum, l'une des entreprises les plus traditionnelles du monde dentaire, incarne l'innovation et la fiabilité, des qualités appréciées par les orthodontistes, les prothésistes dentaires et les spécialistes en orthodontie du monde entier.

Les pinces de la gamme **Premium-Line** sont fabriquées avec le plus grand soin et la plus grande précision en Allemagne, en partie à la main par des spécialistes ayant de nombreuses années d'expertise – une promesse de qualité que vous pouvez ressentir dans chaque détail lors de vos travaux quotidiens. Les technologies de fabrication modernes et les machines rencontrent ici le savoir-faire artisanal et l'expertise de longue date. Le résultat : des pinces qui non seulement facilitent votre travail quotidien, mais établissent également des références en termes de durabilité et de fonctionnalité. Le large portefeuille couvre tous les champs d'utilisation en orthodontie, aussi bien en technique fixe qu'en technique amovible, pour une utilisation en cabinet ou en laboratoire.

Découvrez la haute qualité **des pinces Premium-Line de Dentaureum** et laissez-vous convaincre par les produits.



Vous trouverez ici nos
pinces Premium-Line





PREMIUMLINE



Les pinces Premium-Line de Dentaurum se distinguent par une série de caractéristiques convaincantes qui les différencient des autres pinces du secteur dentaire.

Elles sont spécialement conçues pour une utilisation en orthodontie – que ce soit dans le cabinet au fauteuil du patient ou pour des travaux de cintrage et de coupe au laboratoire.



DES MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE

Acier inoxydable hautement allié, offrant une dureté optimale et une excellente résistance à l'usure.



LARGE PORTEFEUILLE

Large choix de modèles avec des têtes de pince optimisées pour des applications spécifiques en cabinet et en laboratoire.



MADE IN GERMANY

Standards de qualité élevés et précision de fabrication allemande.



TECHNIQUE DE FABRICATION INNOVANTE

Pointes forgées de manière précise et surfaces de coupe et de prise durcies pour une performance maximale.



PRÉCISION ET ERGONOMIE

Facile à utiliser, haute précision et poignées ergonomiques pour un travail confortable.



FIABILITÉ GRÂCE À LA TRADITION

Dentaurum représente une longue expérience, de l'innovation et une fiabilité maximale sur le marché dentaire.



SÉCURITÉ D'UTILISATION ET FACILITÉ DE MAINTENANCE

Une fiabilité maximale grâce à une construction robuste, complétée par de vastes options de garantie et de réparation.





PREMIUMLINE

POUR TOUTE TECHNIQUE

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ

Les pinces Premium-Line sont conçues aussi bien pour la technique fixe que pour la technique amovible. Ils offrent une solution complète pour des exigences variées – aussi bien en laboratoire que dans la pratique, lors de l'application directe sur le patient.



POUR LA TECHNIQUE FIXE

- **Pinces à ligatures :**

Pour une coupe sûre de différentes ligatures

- **Pinces à déposer les brackets :**

Spécialement conçue pour défaire les brackets en douceur

- **Pinces à torque :**

Pour former et ajuster avec précision les arcs en différents matériaux (par ex. acier inoxydable ou nickel-titane)

POUR LA TECHNIQUE AMOVIBLE

- **Pinces à plier :**

Idéales pour l'ajustement et la formation de crochets, d'arcs ou d'autres éléments dans les appareils amovibles

- **Pinces de préhension :**

Parfaites pour la manipulation et l'assemblage de petites pièces

- **Pinces coupantes :**

Pour couper avec précision différents fils

et bien d'autres encore...

AVANTAGES DE LA LARGE GAMME

- **Optimisée pour une application spécifique :**

Chaque pince est conçue pour son application spécifique et offre une efficacité maximale et une précision

- **Gain de temps :**

En utilisant la bonne pince pour chaque technique, le flux de travail peut être optimisé

- **Grande polyvalence :**

La gamme de produits couvre pratiquement tous les besoins en matière de traitement orthodontique



PREMIUMLINE

TECHNIQUE FIXE



Accédez ici aux pinces Premium-Line
pour la technique fixe



PINCE POUR ARCS FACIAUX
REF 003-185-00



PINCE POUR ARCS FACIAUX

Pour la fabrication sur mesure et l'activation des arcs linguaux et palatins.

Pour fil max. : \varnothing 0,9 mm, dur

REF 003-185-00



PINCE POUR ARCS FACIAUX MAGNUM

Idéale pour plier les arcs externes des arcs faciaux.

Pour fil max. : \varnothing 1,8 mm

REF 003-180-01



PINCE TROIS BECS ADERER EXTRA-MINI

Pour le cintrage de fils / d'arcs. Idéale également pour l'ajustage des fils de contention.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur,
F 0,48 x 0,64 mm/19 x 25

REF 003-205-00



PINCE COUPANTE DISTALE MINI

Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique multibrackets.

Pour fil max. : \varnothing 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Longueur de la poignée: 12,0 cm

REF 003-701-00



PINCE COUPANTE DISTALE MINI

Avec une poignée plus longue pour raccourcir les extrémités des arcs.

Pour fil max. : \varnothing 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28
Longueur de la poignée: 14,0 cm

REF 003-702-00



PINCE COUPANTE DISTALE MAXI

Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique multibrackets.

Pour fil max. : \varnothing 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 003-700-00



PINCE UNIVERSELLE WEINGART

Pour le positionnement de l'arc et le cintrage de ses extrémités. Convient aussi pour la dépose des brackets.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

REF 003-120-00



PINCE UNIVERSELLE WEINGART MINI

Pour maintenir l'arc et le positionner. Pince aux formes fines. Ne convient pas pour la dépose de brackets.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

REF 003-121-00



PINCE COUPANTE MEDIUM

Revêtement DLC noir. Coupe nette grâce à la précision des arêtes.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 016-153-00



PINCE COUPANTE MAXI

Embout en métal dur.

Pour fil max. : \varnothing 1,0 mm, dur

REF 004-266-00



PINCE DE LA ROSA

Avec rainures de guidage pour former les arcs de section ronds, carrés ou rectangulaires 16, 18, 22.

REF 004-109-00



PINCE HAMMERHEAD

Pour le pliage des fils / d'arcs en nickel-titane dans les régions molaires.

Pour fil max. : \varnothing 0,45 mm / 18,
 \square 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22

REF 003-355-00



PREMIUMLINE



PINCE COUPANTE MEDIUM
REF 016-153-00



PREMIUMLINE



PINCE À DÉBAGUER OLIVER-JONES
REF 026-347-00



PINCE À TORQUE ANGLE/TWEED

Pour tordre les fils de section carrés ou rectangulaires. Empêche l'écrasement du fil, tenu parallèlement.

Pour fil max. : \square 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

REF 003-442-00



PINCE ANGLE BEC D'OISEAU

Particulièrement résistante, avec un mors plat et un mors arrondi.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 004-139-00



PINCE TWEED

Pour pliures particulièrement délicates. Avec pointe de rechange en métal dur interchangeable par l'utilisateur.

Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

REF 012-351-00



PINCE À SECTIONNER LES LIGATURES MINI

Les mors, aux extrémités parfaitement jointives en position fermée, garantissent la coupe nette de fils mous.

Pour fil max. : \varnothing 0,4 mm, mou

REF 014-151-00



PINCE À DÉBAGUER OLIVER-JONES

Avec coiffe synthétique interchangeable. Embout en métal dur.

REF 026-347-00



PINCE À RETIRER LES BRACKETS

Pour défaire le bracket entre sa base et l'adhésif.

REF 003-349-00




PREMIUMLINE

TECHNIQUE AMOVIBLE



Accédez ici aux pinces Premium-Line
pour la technique amovible

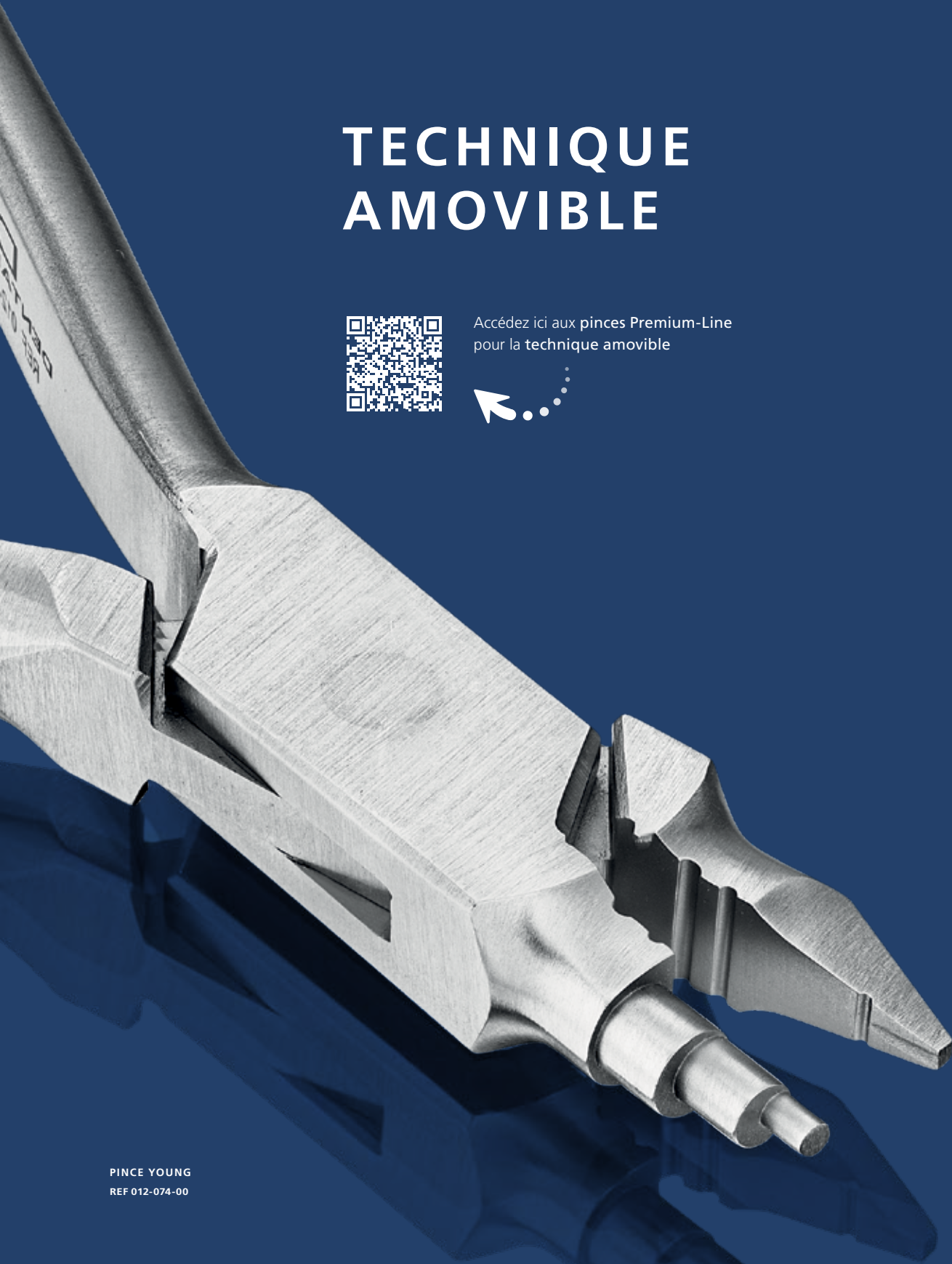

PINCE YOUNG
REF 012-074-00



PINCE ADAMS MAXI

Avec deux mors pyramidaux, lisses.
Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 003-094-00



PINCE ADAMS MAXI

Avec un mors conique et un mors
pyramidal, lisses.
Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 004-095-00



PINCE À GALBER MEDIUM

Pour plier petits ressorts,
œilletons et boucles.
Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 003-053-00



PINCE À GALBER MAXI

Pour plier ressorts, boucles
et espaceurs.
Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 003-233-00



PINCE À CRAMPONS MAXI

Pince à plier et à couper universelle.
Pour fil max. : \varnothing 0,9 mm, dur
Bords coupants jusqu'à : \varnothing 0,7 mm, dur


REF 013-522-00



PINCE YOUNG

Pince universelle pour former
des boucles de toutes dimensions.
Idéale pour arcs labiaux.
Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 012-074-00

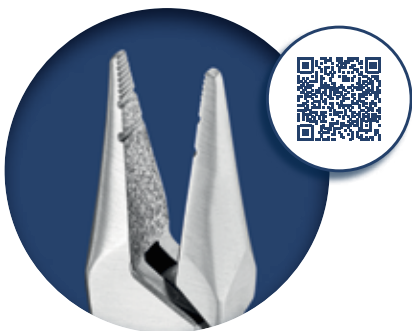


PINCE UNIVERSELLE

Avec mors striés et rainures de guidage.
Surfaces de travail recouvertes d'éléments
en carbure de tungstène.

Pour fil max. : \varnothing 0,8 mm, dur

REF 003-290-00

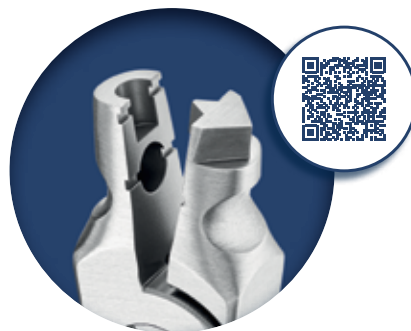

PINCE À FORMER DES CROCHETS FLÈCHE

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 012-520-00



PINCE TROIS BECS ADERER MINI

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 003-201-00



PINCE À MORS PLATS ET EFFILÉS

Mors striés, avec rainures de guidage.
Petite pointe.

Pour fil max. : \varnothing 0,7 mm, dur

REF 035-455-00



PREMIUMLINE



PINCE TROIS BECS ADERER MINI
REF 003-201-00

UNE PERFECTION, QUI DURE **GARANTIE & SERVICE APRÈS-VENTE**

Les **pincas Premium-Line** sont synonymes de haute précision, d'ergonomie et de durabilité – développées pour répondre aux exigences élevées de l'orthodontie et de la prothèse dentaire. Pour que vous puissiez profiter de cette qualité à long terme, nous vous offrons une garantie complète en cas de défaut de matériau ou de fabrication et un service de réparation de première classe.



SERVICE DE RÉPARATION – DURABILITÉ ET RENTABILITÉ

La plupart des **pincas Premium-Line** peuvent nous être retournées pour réparation. Notre service de réparation professionnel garantit la remise en état de vos pincas. Qu'il s'agisse d'un réaffûtage ou du remplacement d'inserts, nous veillons à ce que vos instruments de travail soient à nouveau en parfait état. À un prix raisonnable. Vous économisez ainsi les frais de remplacement et contribuez activement au développement durable. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous faire une offre.



NOTRE GARANTIE – VOTRE CONFIANCE

En achetant une **pince Premium-Line de Dentaurum**, vous choisissez un instrument de haute qualité. Nous accordons une garantie de 10 ans* sur les défauts de matériau et de fabrication. La garantie ne couvre pas l'usure normale de la pince ni une mauvaise utilisation de celle-ci.



Veuillez consulter les conditions de garantie actuelles.

* 10 ans de garantie sur les défauts de matière et de fabrication, la chute des embouts, la rupture et la corrosion du corps de la pince lorsque l'usage et l'entretien sont conformes aux prescriptions. Toute manipulation entraîne une extinction du droit de garantie.

CONSEILS D'ENTRETIEN – POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE

Pour que vous puissiez profiter le plus longtemps possible de la précision et de la performance de vos **pincés Premium-Line**, nous vous recommandons de les entretenir régulièrement.

Les **pincés Premium-Line** de Dentaureum se prêtent à tous les types de nettoyage et de désinfection usuels telles que préconisés par le fabricant.



Vous trouverez ici des informations
détaillées sur l'entretien et la préparation
des **pincés Premium-Line**



NETTOYAGE

Rincer à l'eau courante après chaque utilisation et nettoyer avec une brosse douce. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Ne jamais travailler avec des objets durs.



ENTRETIEN

L'huilage régulier des charnières des pincés, des organes de verrouillages, des surfaces de glissement et d'autres zones critiques assure une longue durée de vie et d'utilisation. À cet effet nous recommandons l'huile d'entretien et de protection de Dentaureum (REF 055-201-00).



DÉSINFECTION

Utiliser des désinfectants appropriés au pH neutre pour éviter d'endommager le matériau. Respecter le délai d'action maximal (jamais pendant le week-end/la nuit !)



STÉRILISATION

Convient à l'autoclave – veuillez respecter les indications du fabricant concernant la température maximale.



STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et bien aéré pour éviter la corrosion.



CONTACT
DENTAURUM

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM